


# Patientvejledning


## S.O.T tommelortose

### AFPRØVNING


For at ortosen skal fungere optimalt er det vigtigt at betrækket er justeret så det sidder godt. Fæst betrækket lidt ad gangen, lad båndet ved tommel (1) sidde fast fra starten. Fæst derefter båndstrop i rækkefølge, båndstrop 2 og derefter båndstrop 3. Efterjuster til at ortosen sidder behageligt.

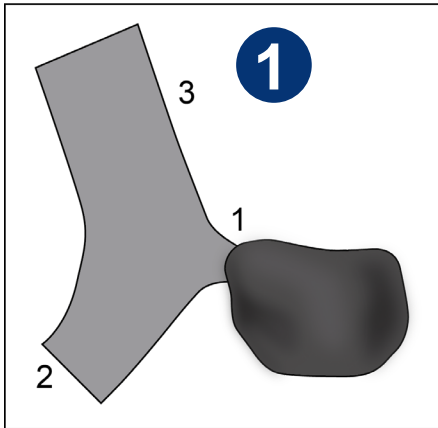

Åben de brede båndstrop 2 & 3 og lad det smalle båndstrop (1) være.

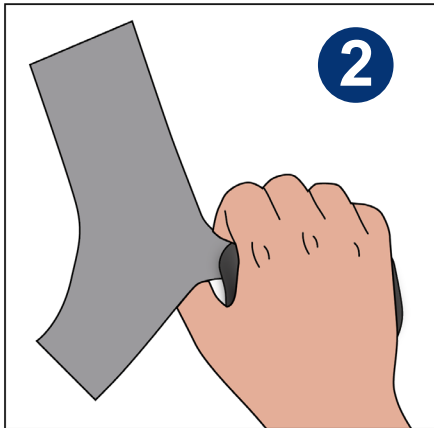



Placer hånden på ortosen.

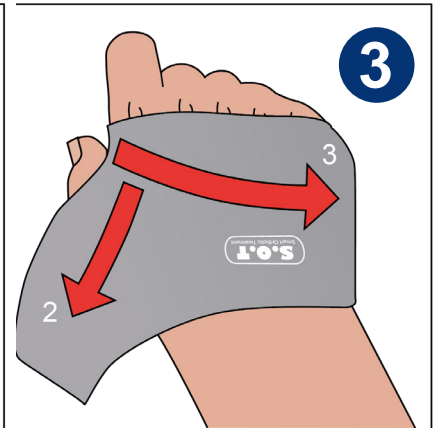

Læg båndet over hånden og fæst båndstrop 3 og derefter båndstrop 2 mod velcron på håndens inderside. Efterjuster båndstrop 1 og 2 til ortosen sidder behageligt.

### TAG PÅ ORTOSEN

### TAG AF ORTOSEN

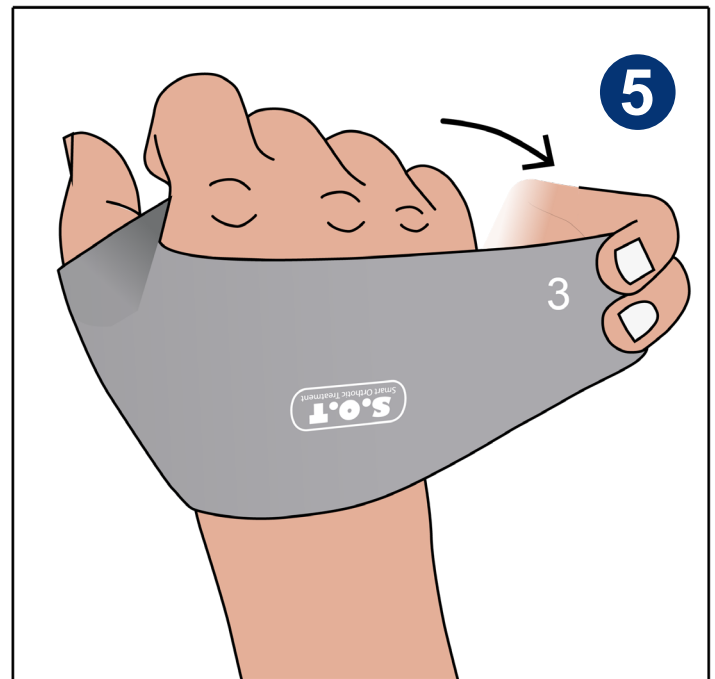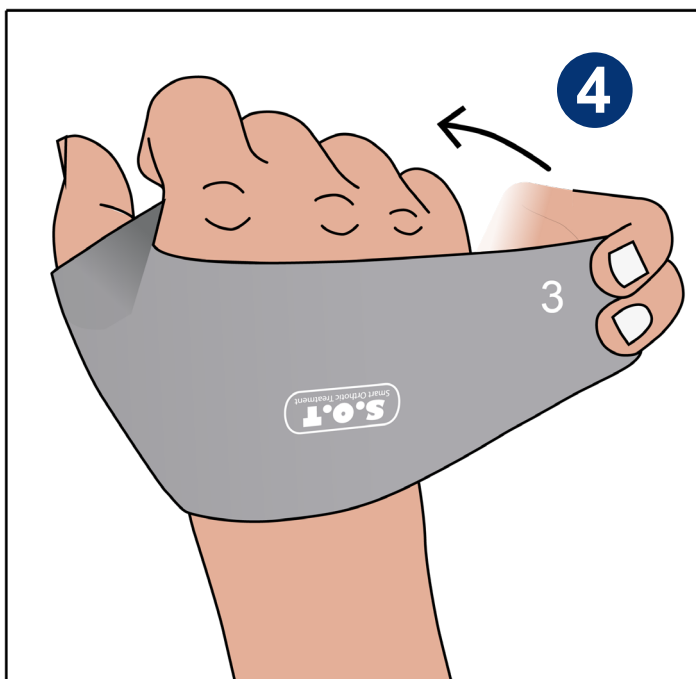

Ved af- og på-tagning efter afprøvningen er gjort skal båndet kun åbnes på lillefingersiden (båndstrop 3)

Ortosen skal anvendes:

---

---

---

---

Godt at tænke på:

---

---

---

---

**VASKEINSTRUKTION:** Vask det komplette monterede produkt i en vaskepose 40° skånevask. Tørres liggende. Undgå skyldemiddel. Må ikke tørretumbles eller kemiskvask.

**Hvis nogen problem opstår kontakt:**

Navn: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_



Tel  
E-post  
Web

SVERIGE  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

DANMARK  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

FINLAND  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

NORGE  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no