

S.O.T TOMMELORTOSE

Hvileortose som positionerer tommel i en optimalt hvileposition



EN UNIK
ORTOSELØSNING!



S.O.T TOMMELORTOSE

er en helt ny anatomisk formet ortose til tommel og håndfladen.

Ortosen er udformet til at begrænse bevægelserne i tomlens CMC- og MCP-led, give støtte til håndfladen samt positionere tomlens led og muskler i en behagelig hvileposition.

Indikationer:

Ved slidgigt*, rheumatoid artrit, adduktionskontraktur i tommel og ved overbelastningsskader.

BEGRÆNSE BEVÆGELSEN



- S.O.T har en kerne af aluminium som gør at ortosen kan finjusteres til ønsket position.
- Ortosen kan efterfølgende justeres som kontraktoren ændres.
- Ortosen med betrækket monteret, kan vaskes i maskine på 40 grader.
- Det smidige design gør den til et udmærket alternativ til specialfremstillede hvileortoser.

ADDUCERET TOMMEL



***OA - CMC-regionen grad 1-4¹. Ved OA i etape 4 er os scaphoideum også involeret. Da bør tommelstøtte kombineres med en håndledsortose.**
¹Eaton and Littler Classification of Basilar Thumb Arthritis.

EKSTRA STØTTE

Når der også behøves støtte til håndleddet kan S.O.T tommelortose bruges sammen med en håndleds-ortose, f.eks. 46029 Vission Håndleds-ortose eller 35207 Selection Open Wrist. For patienter med underarmsfraktur, som under immobiliseringstiden udvikler adduktionskontraktur, kan S.O.T tommelortose med fordel anvendes til nattetid kombineret med håndledsstøtte. For patienter med karpaltunnelsyndrom er det udover håndledsstøtte fordelagtigt at få støtte under MCP leddene og åbne hånden op for at give mere plads til medianus-nerven i carpal-tunnelen ved nattetid. Dette er også en fordel ved gigt/slidgigt, da der foreligger risiko for intrinsic-forkortning. S.O.T Tommelortoses bånd-sæt tages da af og produktet placeres indeni håndleds-ortosen som vist på billedet.




Her vises S.O.T Tommelortose i kombination med håndledsstøtte VISSION. En smidig og funktionel ortoseløsning når der behøves støtte til håndleddet.





S.O.T TOMMELORTOSE

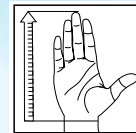

Art.nr.	Beskrivelse	Side	Størrelse	MCP Bredde**	Længde * * (fra håndled til fingerspids)
28720 1011	S.O.T.Tommelortose *	Venstre	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 1012	S.O.T.Tommelortose *	Venstre	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 1013	S.O.T.Tommelortose *	Venstre	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28720 2011	S.O.T.Tommelortose *	Højre	Small	≤7,5 cm	≤ 18,5 cm
28720 2012	S.O.T.Tommelortose *	Højre	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm
28720 2013	S.O.T.Tommelortose *	Højre	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm
28721 1011	Ekstra betræk	Venstre	Small		
28721 1012	Ekstra betræk	Venstre	Medium		
28721 1013	Ekstra betræk	Venstre	Large		
28721 2011	Ekstra betræk	Højre	Small		
28721 2012	Ekstra betræk	Højre	Medium		
28721 2013	Ekstra betræk	Højre	Large		

* komplet ortose med et betræk

** Relation mellem hånd og fingernes længde kan variere.

Se derfor kun størrelseintervallerne som en guide.

Læs mere om S.O.T Tommelortose på vores hjemmeside. Der findes både instruktion, Tips & Tricks for download til både terapeuten og brugeren. www.camp.dk/hand-og-handledsortoser/tommelortoser/S.O.T.Tommelortose.