

Patella



Patella

Patella er specielt udviklet for at imødekomme de forskellige typer af patellaproblemer der kræver behandling. Produktet på billedet har patella pelotten placeret på lateralsiden. Let stabiliserende modeller der har rustfrie spiralfjedre i siderne.

- Flytbar patella pelotte hvor modholdet let kan justeres
- Justerbar lår- og lægomkreds
- Ekstra blødt og smidigt materiale i knæhasen
- Øjer til påtagning i overkanten
- Silikonekant på indersiden, som hindrer migration
- Formsyet patellaåbning

Minor



Minor Wrap



Minor

Minor findes i to versioner, en tube og en "wrap around" model der er helt åben. Let stabiliserende modeller der har rustfrie spiralfjedre i siderne.

- Justerbar lår- og lægomkreds
- Ekstra blødt og smidigt materiale i knæhasen
- Øjer til påtagning i overkanten
- Silikonekant på indersiden, der hindrer migration
- Formsyet patellaåbning
- Giver en god kompression, forberer proprioceptionen og øger blodgennemstrømningen i området

© Camp Scandinavia AB Juni 2012

SELECTION®

Tekstile knæortoser på en helt ny måde!




Fem funktionelle modeller der dækker alle behov!

God pasform

Under design- og udviklingsarbejdet med SELECTION knæ har den underliggende anatomiske struktur været vejviseren. Formen på patellaåbningen er udviklet for at matche den anatomiske form på patella.

Det nederste bånd bagpå er placeret for at give bedst muligt greb og derfor sidder det højt på underbenets muskulatur - højt på gastrocnemius. Dette forhindrer at ortosen glider ned.

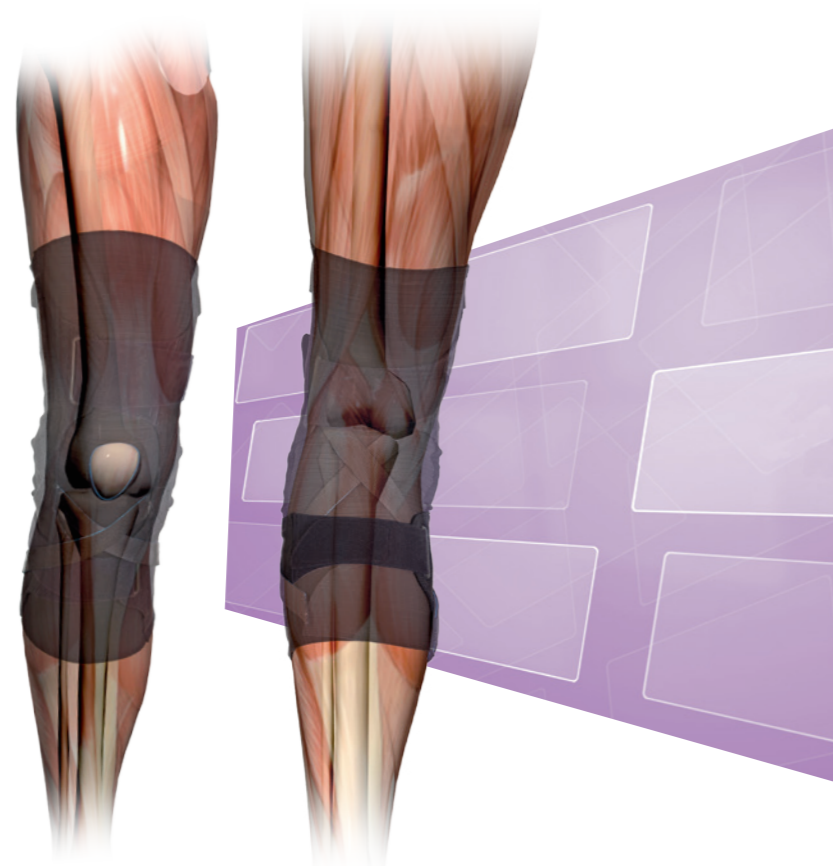

Optima




Optima Wrap

Optima modellerne (35702 og 35703) har begge flere indbyggede ekstra funktioner der giver en fuldstændt ortose med alle tænkbare funktioner.



Leddene har indbyggede huller så man enkelt kan fæstne overstrækningsbåndet direkte på leddet eller enkelt tage båndet væk når det ikke behøves. Overstrækningsbåndet lukkes derefter på forsiden af låret så det er enkelt for brugeren at tage ortosen på og af og desuden regulere styrken i overstrækningsbåndet.

Under patella findes to krydslagte bånd. Disse har til funktion at give øget stabilitet for knæleddet også i A-P. Hvis disse to bånd ikke er nødvendige kan de enkelt klippes af.

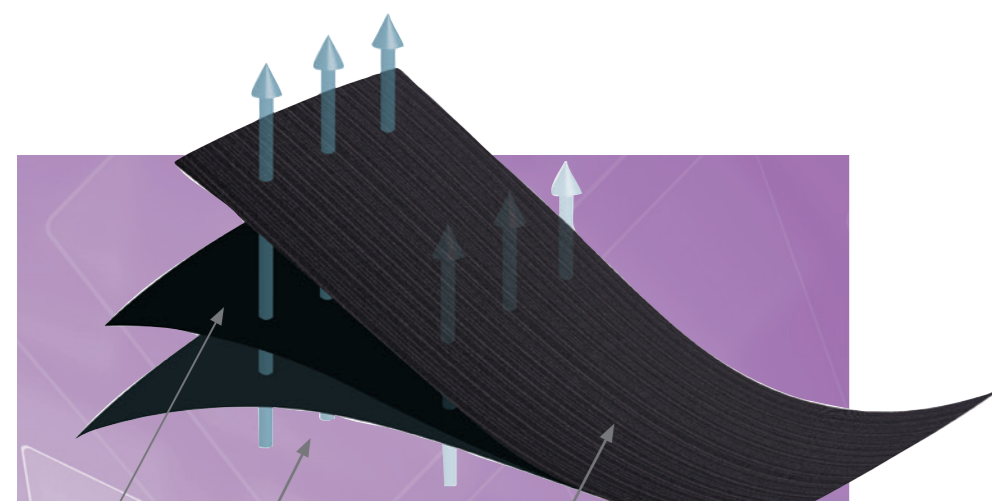

Tilpasset funktion

Blødt materiale mod huden.

Glat yderside der får andre materialer til at glide let mod overfladen.

Kantebånd er ikke nødvendigt. Kan klippes uden at det trevler (35701).

Materialets funktionsbærer hjælper med til at materialet transporterer fugt væk fra huden og at huden kan ånde


Til SELECTION har vi valgt at arbejde med et anderledes materiale. Nyt, frisk og moderne i en kombination der opfylder brugerens ønsker. SELECTION-materialet er tyndt og smidigt, lader huden ånde og bliver ikke så varmt. Velcrobåndene og hæftefladerne er ekstra smidige for at give en så lav profil som muligt. Eftersom materialet ikke behøver noget kantebånd er det muligt at klippe i det uden at det trevler op (35701).



Optima

Optima findes i to versioner, en tube og en "wrap Around" model der er helt åben. Stabiliserende og aflastende knæortoser med indstilleligt led. Begge disse modeller har flere indbyggede funktioner hvilket medfører et bredt anvendelsesområde. Visse funktioner kan enkelt fjernes hvis de ikke behøves.

- Aftageligt kryds til begrænsning af overstrækning
- Stopbånd til øget A-P stabilitet under patella
- Led med indstilleligt bevægelsesomfang
- Justerbar lår- og lægømkreds
- Fire separate formsyede bånd med integreret D-ring
- Ekstra blødt og smidigt materiale i knæhasen
- Øjer til påtagning i overkanten
- Silikonekant på indersiden, der hindrer migration
- Formsyet patellaåbning
- Giver god kompression, forbedrer proprioceptionen og øger blodgennemstrømningen i området

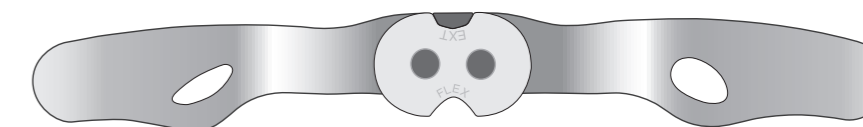

Optima-modellerne leveres med et indstilligt R.O.M. led. Leddet er let forbuktet for optimal pasform. sammen med ortosen følger forskellige indsatser til regulering af bevægelsesomfanget. Ortosen leveres med leddet indstillet i 10° flexion.

