



Fod- och fodledsortoser

Allard AFO Muskelfunktionsguide

Denne guide er baseret på udvikling og respons fra testpersoner samt feedback fra patienter.

Muskelfunktion: Ingen eller begrænsed ● Moderat ● Normal funktion ●

Mere DISTAL svaghed



Ypsilon Flow 1/2




Bevægelsesomfang

A/P

M/L

Assisterende Dorsalflexion

Spasticitetskontroll

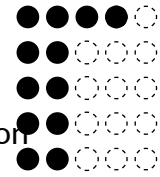

ToeOFF Flow 2 1/2




Bevægelsesomfang

A/P

M/L

Assisterende Dorsalflexion

Spasticitetskontroll

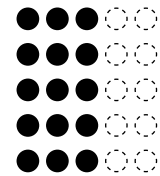

Mere PROXIMAL svaghed



ToeOFF® 2 1/2




Bevægelsesomfang

A/P

M/L

Assisterende Dorsalflexion

Spasticitetskontroll

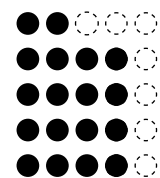

BlueROCKER® 2 1/2




Bevægelsesomfang

A/P

M/L

Assisterende Dorsalflexion

Spasticitetskontroll

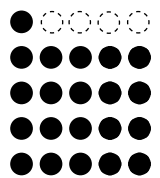

ALLARD CUSTOM AFO

I tilfælde med individuelle behov hvor scanning, afstøbning eller hvor målene falder udenfor ovenstående parametre, tilbyder CAMP Scandinavia tilpasning til de individuelle behov på baggrund af scanning eller afstøbning. Kontakt kundesupport for yderlig information eller besøg camp.dk

Ypsilon® Flow½

Ypsilon® Flow½ er en dropfodsorthose til den aktive patient som har dropfod og/eller behøver mindre støtte i ståfasen. Ypsilon® Flow½ har en hælhøjde som er ca 7 mm i alle størrelser. Den er udviklet for at tillade optimal bevægelsesomfang og giver en dynamisk "Toe-OFF" funktion samtidigt som det er muligt for muskler at arbejde mere aktivt. Fodbladet følger fodens form og med hjælp af gulvreaktionskraften kan anvenderen udnytte "toe-off" effekten med mindre styrke. Det Y-formede fæstpunkt ligger på hver side omkring tibiakammen og mindsker risikoen for tryk mod prominenser samt tibiakammen. Derfor er dette en orthose til den aktive brugere som stiller høje krav på funktion og bevægelighed.



Anvendelsesområde: Dropfod med stabil ankel i kombination med ingen til mild spasticitet, patienter som behøver mere flexibilitet og mindre støtte.

Kontraindikationer: Kraftig ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet

Øvrigt: Yderligere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction. Ypsilon® Flow leveres med komplet båndsat.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28880	Ypsilon® Flow½	Small	23 cm	35,5 cm	Ve/Hø	35-38
28880	Ypsilon® Flow½	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Ve/Hø	38-42
28880	Ypsilon® Flow½	Large	27 cm	37,5 cm	Ve/Hø	42-45
28880	Ypsilon® Flow½	X-Large	28,5 cm	38,5 cm	Ve/Hø	>45
28884	Polstring	S/M/L				Bilat.
28884	Polstring	X-Large				Bilat.
28885	Bånd	One Size				Bilat.
99809	Microfix Ypsilon Flow					



ToeOFF® Flow2½

Ved at kombinere vores lange erfaring og udviklingen i fremstillingsteknikken af de anmodninger vi har modtaget gennem årene, har vi nu udviklet en ny Allard AFO, ToeOFF® Flow2½. ToeOFF® har siden introduktionen i 1997 været ledende med sin unikke funktion og dynamiske egenskaber. ToeOFF® Flow2½ har nye unikke egenskaber, nye funktioner og fordele; lavere hælhøjde, ca. 7 mm i alle størrelser, mere ROM i A-P plan og glattere ydre under fodbladet.

ToeOFF® Flow2½ har alle Mikrofixdelene monteret ved levering for lettere montering af SoftKIT™, KomfortKIT™ eller CoverKIT™. Båndene er de samme som for ToeOFF® 2.0. Med ToeOFF® Flow2½ bliver det en bedre pasform i de moderne sko med lavere hæle, og patienten vil også få en skinne med en lavere profil i sålen.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen til mild spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og til tåamputationer.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. Alle Allard AFO leveres med komplet bånd sæt. Denne model findes også i et flertal af andre varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundeservice for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm		32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm		38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm		42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	L/R	>45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	X-Small	21 cm	36 cm		32-35
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Small	23 cm	38 cm		35-38
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Medium	24,5 cm	40,4 cm		38-42
28962	ToeOFF Flow2½ m/D-ring	Large	27 cm	43 cm		42-45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm		>45

ToeOFF® 2½

Dropfodsortosen ToeOFF® 2 1/2 har samme dynamiske funktion og stabilitet, som en ToeOFF® 2,0, men med en hælhøjde på 7 mm, så den passer bedre i moderne sko med lavere hælhøjde. Den har også mindre tåløft, som giver mere plads i tåboxen i skoen. Allard AFO har siden starten i 1997 været førende med sine unikke funktioner og dynamiske egenskaber.

ToeOFF® 2 1/2 har alle MicroFIX-delene monteret på indersiden ved levering i forhold til hurtig og nem montering af polstringen. Båndløsningen er den samme som 2,0, fremstillet i et holdbart materiale og kan leveres med eller uden en D-ring. Båndene kan monteres, så de tilsluttes enten indvendig eller udvendig på ortosen. Det er altid vigtigt at justere alle Allard AFO til hælhøjden af skoen.

Læs mere om dette i Allard AFO professional instruktion.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med ingen til middel spasticitet og i visse tilfælde nedsat knækontrol. Kan anvendes ved tåamputationer.

Kontraindikationer: Svær ødem, diabetes med bensår og meget nedsat følsomhed og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. BlueROCKER® leveres med komplet bånd sæt. Denne model er også tilgængelig i flere andre varianter, hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er monteret ved levering -kontakt kundesupport for mere information om disse modeller. "Posen, der leveres til produktet, er fremstillet af genbrugs PET-flasker.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28980	ToeOFF® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28980	ToeOFF® 2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28980	ToeOFF® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28980	ToeOFF® 2½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	38-42
28980	ToeOFF® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® 2½ Addition

ToeOFF® 2½ Addition er dybest set samme produkt som ToeOFF® 2½, men har fået en overflade af et farvet materiale for at give produktet et andet udseende. Addition fås i tre farvekombinationer, Beige, Sort og camouflage (Camo). Overfladen Addition gør at tøjet lettere glider mod materialet, samtidigt at hele produktet får en anden farve hele vejen ned til bunden af skinnen.

Addition fås kun med D-ring bånd. Mikrofix delene som båndet fæster i sidder på ortosens inderside sammen med Mikrofix delene til montering af polstringen (SoftKIT eller KomfortKIT). ToeOFF® 2½ Addition i beige og camouflage har et mønstret ydre. Hver ortose får derfor et unikt mønster, som variere lidt mellem de forskellige ortoser.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen til moderat spasticitet, i nogle tilfælde selv i tilfælde ved nedsat knækontrol og tåamputationer.

Kontraindikationer: Svært ødem, diabetes med bensår, meget nedsat følsomhed og kraftig spasticitet.

Øvrigt: For mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse, se Allard AFO Professional instruktion.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28954	Sort m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28954	Sort m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28954	Sort m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28954	Sort m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28954	Sort m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28955	Camo m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/hø	32-35
28955	Camo m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28955	Camo m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28955	Camo m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28955	Camo m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28956	Beige m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28956	Beige m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28956	Beige m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28956	Beige m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28956	Beige m D-ring	X-Large	28,5 cm	43 cm	Ve/Hø	>45

ToeOFF® 2.0

Ved at kombinere vores lange erfaring og udvikling i fremstillingsteknik med de ønskemål som vi har modtaget gennem årene har vi nu udviklet ToeOFF® 2.0. ToeOFF® har siden introduktionen 1997 været førende med sin unike funktion og sine dynamiske egenskaber. ToeOFF® 2.0 har samme egenskaber og funktioner som den originale ToeOFF®, og yderligere udviklet af både form og funktion. Formen på 2.0 er blevet ændret for at give en smidigere pasform, bedre geometri og jævnere overflade. Derudover er alle Mikrofix dele monteret ved levering for en hurtigere og enklere montering af SoftKIT™ og ComfortKIT™. Båndet har en ny løsning og er lavet i et nyt slidstærkt materiale. Derudover findes der bånd med eller uden D-ring. Båndet kan monteres på venstre eller højre side afhængig af patientens funktionsbehov. De dynamiske egenskaber er ikke ændret uden den graderede dynamiske funktionen og stabiliteten mellem de forskellige størrelser er som tidligere. ToeOFF® 2.0 har en hælhøjde som er imellem 12 – 15 mm afhængig af størrelsen.



Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen til mild spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og til tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. Alle ToeOFF® leveres med komplet bånd sæt. Denne model findes også i et flertal af andre varianter hvor SoftKIT™/ComfortKIT™ og bånd er monteret ved levering - kontakt kundeservice for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28920	ToeOFF 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28920	ToeOFF 2.0	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28920	ToeOFF 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28920	ToeOFF 2.0	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28920	ToeOFF 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



ToeOFF® Short


ToeOFF® kort er en specialmodel der har kortere tibiadel, bredere fodplade over metatarsalledene, lavere tåspring og lavere hælhøjde end ToeOFF® originalortose. Skal anvendes med polstring. ToeOFF® kort har en hælhøjde som er ca 7 mm i alle størrelser.

Anvendelsesområde: Dropfod kombineret med ingen eller middel spasticitet, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol og til tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28990	ToeOFF Kort Sort	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28990	ToeOFF Kort Sort	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28990	ToeOFF Kort Sort	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42

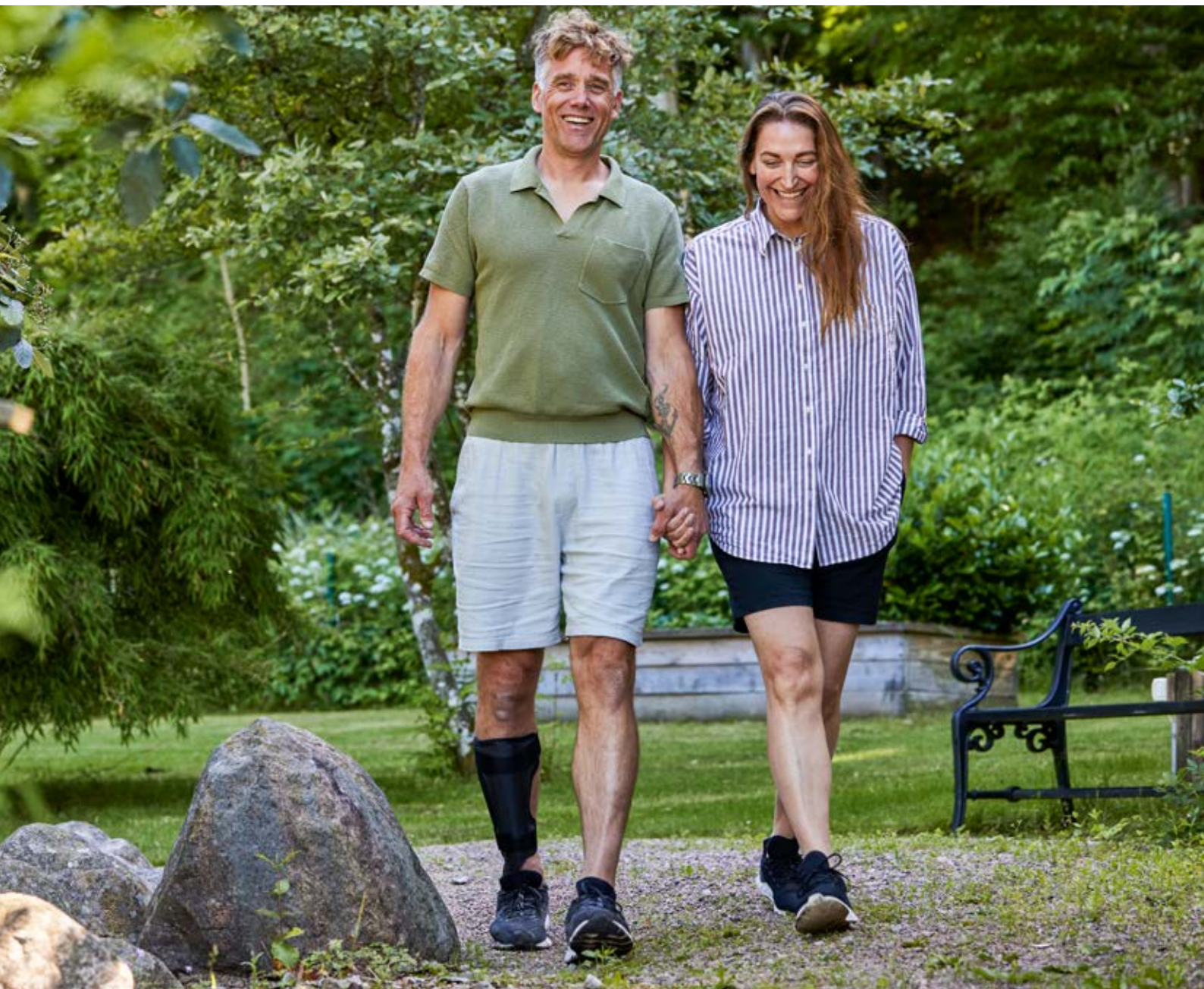

BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® er den mest stabile dropfodsartose. Den har nu fået et opdateret udseende som BlueROCKER® 2.0. Ortosen har en bra geometri och slät yta. Mikrofix delene som båndet fæster i sidder på ortosens inderside sammen med Mikrofix delene til montering af polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). Også båndene har fået nyt design og findes både i og uden D-ring. Båndet kan enkelt monteres på den ønskede side afhængig af patientens funktionsbehov. BlueROCKER® har en hælhøjde som er imellem 12 - 15 mm afhængig af størrelsen.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med ingen eller op til svær spasticitet, nedsat knæ- og hoftekontrol, svaghed eller funktionssvigt i benmuskulatur, nedsat balance, bilaterale patienter og delfodsamputation.

Kontraindikationer: Kraftigt ødem, diabetes med bensår og meget nedsat sensibilitet.

Øvrigt: Mere information om afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® 2.0 leveres med komplet bånd sæt. Denne model findes også i et antal varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundeservice for mere information om disse modeller.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28940	BlueROCKER 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28940	BlueROCKER 2.0	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28940	BlueROCKER 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28940	BlueROCKER 2.0	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28940	BlueROCKER 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



BlueROCKER® 2½

Dropfods ortosen BlueROCKER® 2 1/2 har samme dynamiske funktion og stabilitet, som en BlueROCKER® 2,0, men med en hælhøjde på 7 mm, så den passer bedre i moderne sko med lavere hælhøjde. Den har også mindre tåløft, som giver mere plads i tåboxen i skoen. Allard AFO har siden starten i 1997 været førende med sine unikke funktioner og dynamiske egenskaber.

BlueROCKER® 2 1/2 har alle MicroFIX-delene monteret på indersiden ved levering i forhold til en hurtig og nem montering af polstringen.

Båndløsningen er den samme som 2.0, fremstillet i et holdbart materiale og kan leveres med eller uden en D-ring. Båndene kan monteres, så de tilsluttes enten indvendig eller udvendig på ortosen. Det er altid vigtigt at justere alle Allard AFO til hælhøjden af skoen.

Læs mere om dette i Allard AFO professional instruktion.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med ingen til svær spasticitet, nedsat knæ- og hoftekontrol, svaghed eller funktionsfejl i benets muskelgrupper, nedsat balance, bilateral funktionsreduktion og delfodsamputation.

Kontraindikationer: Svær ødem, diabetes med bensår og meget nedsat følsomhed.

Øvrigt: Mere information og afprøvning, tilpasning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional instruktion. BlueROCKER® leveres med komplet bånd sæt. Denne model er også tilgængelig i flere andre varianter, hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er monteret ved levering -kontakt kundesupport for mere information om disse modeller. " Posen, der leveres til produktet, er fremstillet af genbrugs PET-flasker.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28970	BlueROCKER® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28970	BlueROCKER® 2½	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28970	BlueROCKER® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28970	BlueROCKER® 2½	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28970	BlueROCKER® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Small	23 cm	38 cm	VE/Hø	35-38
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	Large	27 cm	43 cm		42-45
28972	BlueROCKER® 2½ m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45

BlueROCKER® Short

SHORT er specialmodeller, som er udviklet til at passe personer, som har kortere tibia og en bredere fod over metatarsalleddene. Polstring skal altid anvendes i forhold til god patientkomfort.

SHORT har en hælhøjde på 7 mm i alle størrelser.

Anvendelsesområde: Dropfod i kombination med svage plantarflexorer, i visse tilfælde også ved nedsat knækontrol. Kan også anvendes ved bilaterale problemer og ved delfodsamputationer (mest proximale niveau er Chopart).

Kontraindikationer: Kraftig ødem, diabetes med bensår, meget nedsat sensibilitet og kraftig spasticitet.

Øvrigt: Yderligere information om afprøvning, indikationer, tilretning, valg af model og størrelse findes i Allard AFO Professional Instruction.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28995	BlueROCKER® Short	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28995	BlueROCKER® Short	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28995	BlueROCKER® Short	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

I tilfælde, hvor ToeOFF® og BlueROCKER® ikke opfylder din patients behov, er det muligt at bestille en individuel tilpasset Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®. Dette bliver dog ikke et CE-mærket produkt. Ordren kan foretages på flere forskellige måder, scanning, positiv gips, negativ gips (plastgips eller STS-sok) eller efter mål. Baseret på specifikationer fremstilles en ortose, der følger standarden for ToeOFF® / BlueROCKER® i forhold til former og egenskaber. Ved bestilling findes der en række forskellige valg, der kan foretages i forhold til hælhøjde, stabilitet, og aflastning. Der udfyldes en særlig blanket ved bestilling. Den kan downloades under dokumenter på produktet på hjemmesiden.

Øvrigt:

Kontakt kundesupport for at få flere oplysninger om blanketter og procedurer til bestilling af en individuelt fremstillet Custom ToeOFF® eller BlueROCKER®.

Art.nr.	Model
28460	Custom ToeOFF®
28480	Custom BlueROCKER®



Du kan også bestille Custom digitalt via Allard Configurator på vores hjemmeside. Kontakt kundesupport ved behov af licens.

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

Når du bestiller en Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®, er der nogle ting der du skal tage stilling til. Nedenfor har vi samlet de forskellige valgmuligheder og hvordan det påvirker den samlede pris. Der er en særlig bestillingsformular for disse produkter. Formularen kan downloades fra Camps hjemmeside blandt de produktoplysninger, der er tilgængelige på respektive produkt samt i Download Center under Allard AFO.

Custom ToeOFF® & Custom BlueROCKER®

Custom ToeOFF® Art.nr.	Custom BlueROCKER® Art.nr.	Beskrivelse		Tillæg- sømkost- ninger
28460 1190-1310	28480 1190-1310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, venstre	Fodpladen 190,195 - 310 mm	Grundpris
28460 2190-2310	28480 2190-2310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, højre	Fodpladen 190,195 - 310 mm	Grundpris
28463 0001	28483 0001	Fodpladens bredde	+ 5 mm	Nej
28463 0002	28483 0002	Fodpladens bredde	- 5 mm	Nej
28464 0005	28484 0005	Hælhøjde	5 mm	Nej
28464 0007	28484 0007	Hælhøjde	7 mm	Nej
28464 0010	28484 0010	Hælhøjde	10 mm	Nej
28464 0012	28484 0012	Hælhøjde	12,5 mm	Nej
28464 0015	28484 0015	Hælhøjde	15 mm	Nej
28464 0020	28484 0020	Hælhøjde	20 mm	Nej
28464 0025	28484 0025	Hælhøjde	25 mm	Nej
28464 0030	28484 0030	Individuel hælhøjde	højre end 25 mm	Ja
28465 0000	28485 0000	Aflastning	Tibiakammen	Nej
28465 0003	28485 0003	Aflastning 3 mm	Tibiakammen	Nej
28465 0005	28485 0005	Aflastning 5 mm	Tibiakammen	Nej
28466 0000	28486 0000	Individuel aflastning		Ja
28468 0001	28488 0001	Fleksibilitet A/P	+ 1 lager fiber	Ja
28468 0002	28488 0002	Fleksibilitet A/P	+ 2 lager fiber	Ja
28468 0003	28488 0003	Standart forfod/stivere hæl	+ 1 lager fiber	Ja
28468 0004	28488 0004	Standard forfod/stivere hæl	+ 1 lager fiber	Ja
28469 0001	28489 0001	Stivhed A/P	- 1 lager fiber	Ja
28469 0002	28489 0002	Stivhed A/P	- 2 lager fiber	Ja
28469 0003	28489 0003	Standart forfod/mykere hæl	- 1 lager fiber	Ja
28469 0004	28489 0004	Standart hæl/mykere hæl	- 1 lager fiber	Ja
28470 0001	28490 0001	Stabilitet M/L	+ 1 lager fiber	Ja
28470 0002	28490 0002	Stabilitet M/L	+ 2 lager fiber	Ja
28471 0001	28491 0001	Stabilitet M/L	- 1 lager fiber	Ja
28471 0002	28491 0002	Stabilitet M/L	- 2 lager fiber	Ja
28473 0000	28493 0000	Aflastning fodryg	Høj vrst	Nej



Custom ToeOFF®

Det er muligt at bestille en Custom ToeOFF® til patienter, der har behov for en anden form på grund af atrofi/hypertrofi, unik underbensform, anden stivhed, osv. Bestillingen kan foretages på forskellige måder. Scanning, negativ gips (plastgips eller STS-sok), positiv gips eller efter mål. Ved bestilling findes en række forskellige valg som f.eks hælhøjde, stabilitet, aflastning mm. En speciel blanket skal udfyldes ved bestilling. Blanketten kan downloades under produktet.

Øvrigt: Kontakt kundesupport for yderligere information om blanketten og fremgangsmåde for bestilling af en individuelt fremstillet Custom ToeOFF® AFO.

Art. nr.	Model
28460	Custom ToeOFF®
28458	Custom Softkit
28459	Custom Comfortkit



Custom BlueROCKER®

Det er muligt at bestille en Custom BlueROCKER® til patienter, der har behov for en anden form på grund af atrofi/hypertrofi, unik underbensform, anden stivhed, osv. Bestillingen kan foretages på forskellige måder. Scanning, negativ gips (plastgips eller STS-sok), positiv gips eller efter mål. Ved bestilling findes en række forskellige valg som f.eks hælhøjde, stabilitet, aflastning mm. En speciel blanket skal udfyldes ved bestilling. Blanketten kan downloades under produktet.

Øvrigt: Kontakt kundesupport for yderligere information om blanketten og fremgangsmåde for bestilling af en individuelt fremstillet Custom BlueROCKER® AFO.

Art. nr.	Model
28480	Custom BlueROCKER®
28458	Custom Softkit
28459	Custom Comfortkit

COMBO

Smidig og unik ortoseløsning ved hyperekstension i kombination med dropfod.

ToeOFF® har i mange år bevist sit værd både i rehabilite-ringsprocessen men også i det daglige liv og har hjulpet mange brugere med dropfod til en bedre gang og øget livskvalitet. ToeOFF® er sommetider blevet kombi-neret med knæortoser for at modvirke overstrækning i knæleddet. Nu findes en ortoseløsning til dette, der kombineres direkte med ToeOFF® eller BlueRocker®.

Combo-ortosen tilpasses individuelt til hver patient. De forskellige komponenter kan kombineres afhængig af patientens størrelse og længde.

- Valg af størrelse på lårdelen er afhængig af hvor højt oppe på låret denne placeres. Den kan dog ikke placeres lavere end ca. 10 cm over Tibia plateauet.
- Valg af størrelse for koblingsdelen er afhængig af hvilken størrelse ToeOFF® eller BlueRocker der anvendes
- Valg af størrelse på hyperekstensionskrydset bestemmes af knæbredden.
- Samtlige 5 artikler skal bestilles for at få en komplet ortose.
- Combo er ikke beregnet til patienter med vægt >150 kg, højde >2 m.





Knæmål 1: Mål M-L midt-patella

Knæmål 2: Omkreds 20 cm over patella

Knæmål 3: Mål M-L 20 cm under patella.

ToeOFF® Combo

Combo er en ortose-del specielt udviklet til behandling af hyperekstension i kombination med dropfod. Combo er en forlængelse der monteres på en ToeOFF® eller BlueROCKER. Den unikke konstruktion bevirker at dropfodsskinne og Combo-delen let kan sammenkobles.

Anvendelsesområde: Knæledsinstabilitet, hyperekstension i kombination med dropfod som følge af stroke, post-polio, Ms, neuropati etc. Patientvægt max 150 kg. Patientens højde max. 2 m. Combo bør ikke anvendes sammen med Ypsilon FLOW eller ToeOFF FLOW.

Kontraindikationer: Totalt bortfald af ligament i knæet. Totalt Quadricepsbortfald. Patientlængde over 2 meter. Patientvægt over 150 kg. Kraftigt reduceret kognitive evner. OBS: Når afprøvning er udført må der ikke være mere end 10° hyperekstension tilbage i ortosen.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Mål 1	Mål 2	Mål 3
28780	Knæled m. skinner	One Size				
28781	Lårdel	Small	Ve/Hø	11-15 cm		30-40 cm
28781	Lårdel	Medium	Ve/Hø	13-17 cm		38-50 cm
28781	Lårdel	Large	Ve/Hø	15-19 cm		48-60 cm
28781	Lårdel	X-Large	Ve/Hø	17-21 cm		58-70 cm
28782	Bånd, tekstil og spænder	Small	Bilat.		7-10,5 cm	
28782	Bånd, tekstil og spænder	Medium	Bilat.		9,5-13 cm	
28782	Bånd, tekstil og spænder	Large	Bilat.		12,5-16 cm	
28796	Lægbånd	One Size				
28783	Softkit (2 stk)	Small				
28783	Softkit (2 stk)	Medium				
28783	Softkit (2 stk)	Large				
28783	Softkit (2 stk)	X-Large				
28784	Tibiakobling	Small				
28784	Tibiakobling	Medium				
28784	Tibiakobling	L-XL				

NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ er en ortose der er udviklet for at hjælpe personer med mild dropfod til bedre dorsalfleksion. Den polstrede ortose-plastdel sidder behageligt mod benets forside og har en aftagelig vaskbar polstring. Graden af dorsalfleksion justeres ved krogens placering i snøringen samt ved justering af den øvre del af båndet. Det smidige design gør den usynlig under lange bukser. NAVIGAIT findes i tre størrelser. Plastdelen kan ved behov trimmes en del i over- og underkant. Anvend NAVIGATE 4-Foot sammen med NAVIGATE i de tilfælde hvor brugeren ikke benytter sko. Produktet kan også anvendes i sandaler, hvor der ikke er andet at fæste i. NAVIGATE 4-Foot skal sidde på forfoden. Kombination af elastiske og rigide materialer med siliconerand på indersiden sikrer at den sidder korrekt.

Anvendelsesområde: NAVIGAIT er beregnet til at støtte en fod når muligheden for aktiv dorsalfleksion er reduceret som følge af neurologiske tilstande så som Stroke, MS eller Post- polio syndrom.

Kontraindikationer: NAVIGAIT skal ikke anvendes af personer der udviser spasticitet eller har kraftige ødemer.

Øvrigt: NAVIGAIT kompenserer ikke fejlstillinger i foden og deformiteter, disse skal behandles af sko og/eller indlæg efter behov.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28410	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilat.
28415	4-foot	Small	21-23 cm	Bilat.
28415	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilat.
28415	4-foot	Large	26-29 cm	Bilat.
28412	Ekstra bånd med krog	X-Small		Bilat.
28412	Ekstra bånd med krog	Small/Medium		Bilat.
28412	Ekstra bånd med krog	Large/X-Large		Bilat.
28413	Kraftigere gummibånd	X-Small		Bilat.
28413	Kraftigere gummibånd	Small/Medium		Bilat.
28413	Kraftigere gummibånd	Large/X-Large		Bilat.
28414	Ekstra bånd sæt	X-Small		Bilat.
28414	Ekstra bånd sæt	Small/Medium		Bilat.
28414	Ekstra bånd sæt	Large/X-Large		Bilat.



Mål: Plastdelens længde.



Prim dropfodsorthose

En lidt blødere dropfodsorthose lavet af polypropylen beregnet til at blive brugt ved lette problemer med dropfod forbundet med forskellige neurologiske diagnoser. Skinnen har en "kryds"-konstruktion på bagsiden med åbent hælparti samt åbning over læggen. Orthosen har en bred polstring på den øverste kant, der lukkes med velcro. Der medfølger et ekstra velcrobånd, der hjælper med at holde foden på plads i orthosen. Fodbladet på orthosen kan enkelt klippes til korrekt pasform efter brugerens fod-størrelse.

Anvendelsesområde: Let dropfod.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Længde	Højde	Ve/Hø
71296	Hvid	Small	23 cm	29 cm	Ve/Hø
71296	Hvid	Medium	24,5 cm	31 cm	Ve/Hø
71296	Hvid	Large	26 cm	33 cm	Ve/Hø
71296	Hvid	X-Large	27,5 cm	35 cm	Ve/Hø



ATX Foot Lifter dropfodsorthose

ATX Foot Lifter er en tekstil dropfodsorthose som anvendes til personer der har en lettere dropfod som behøver en enkel ortoseløsning som hjælper med at holde foden oppe ved gang ude og inde. Orthosen består af en tekstil ankeldel som skal sidde over anklerne. I tekstildelens bagside er der en geleplade for at mindske trykket mod akillesenen. En plade med krog placeres under snørrer på skoen (mellem snøringen og pløsen). Det elastiske funktionsbånd sættes i krogen og fæstes på hver side på den tekstile ankeldel. Spændingen reguleres af placeringen af krogen samt hvor velcrobånd-pladerne fæstes mod tekstilen. Hvis ATX Foot Lifter skal anvendes uden sko findes der en separat tekstil foddel som tilbehør.

Mål 1: Mål tages omkring anklen, over malleolen.

Mål 2: Mål tages omkring foden over fodryggens højeste punkt

Anvendelsesområde: Hjælper til med dorsal fleksion til en slap fod og bidrage til push-off ved gang. Beregnet til anvendelse ved lettere tilfælde af dropfod.


Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28168	ATX Foot Lifter	X-Small	13-17 cm	Bilateral	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Small	17-21 cm	Bilateral	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Medium	21-25 cm	Bilateral	Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Large	25-29 cm	Bilateral	Bilat.
28169	ATX Foddell	Small		17-21 cm	Ve/Hø
28169	ATX Foddell	Medium		21-25 cm	Ve/Hø
28169	ATX Foddell	Large		25-29 cm	Ve/Hø
28170	ATX skostøtte	One Size		Bilateral	Bilat.
28171	Ekstra ATX elastisk bånd	X-Small/Small		Bilateral	Bilat.
28171	Ekstra ATX elastisk bånd	Medium		Bilateral	Bilat.
28171	Ekstra ATX elastisk bånd	Large		Bilateral	Bilat.
28172	Ekstra kroge 2 stk.	One Size		Bilateral	Bilat.

ToeUP™ tekstil ankel fod ortose

ToeUP er en tekstil dropfodsorthose til brugere med lettere form for dropfod. Orthosen har en ankeldel i tekstil med lav profil der lukker over malleolerne. Ankeldelen er forbundet med en elastisk strop til kroge, der fastgøres under snøringen eller i snørehullerne på skoen. Dette giver et løft af forfoden under gang. Løftet styres af krogenes position eller af stroppens position på ankeldelen. Der er en tilhørende D-ring, der kan holde stropperne sammen. ToeUP har en foddel, der kan anvendes til indendørs brug. Det er vigtigt at bruge ToeUP sammen med en strømpe.

Anvendelsesområde: Til patienter med milde dropfodssymptomer på grund af neurologisk og/eller muskulær svaghed i dorsiflexorerne.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
28500	ToeUp - komplet inkl. 28502 og 28506	XS-L	Bilateral
28501	Foddel	S-L	Ve/Hø
28502	Ekstra elastisk bånd	XS-S, M-L	-
28503	Ekstra kroge	Universal, par	-
28504	Ekstra D-ring	Universal	-
28505	Ekstra krok under skolisse	Universal	-
28506	Ekstra ankeldel	XS-L	Bilateral
28504	Ekstra D-Ring	One size	

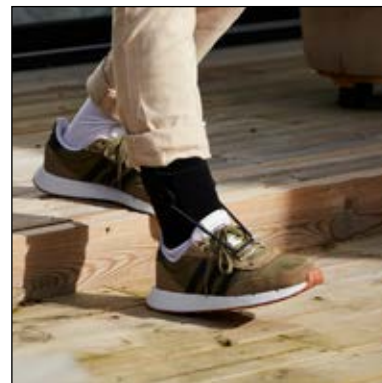

Swedish dropfodsorthose

En lidt blødere dropfodsorthose lavet af polypropylen beregnet til at blive brugt ved lette problemer med dropfod forbundet med forskellige neurologiske diagnoser. Skinnen har en "kryds"-konstruktion på bagsiden med åbent hælparti samt åbning over læggen. Orthosen har en bred polstring på den øverste kant, der lukkes med velcro. Der medfølger et ekstra velcrobånd, der hjælper med at holde foden på plads i orthosen. Fodbladet på orthosen kan enkelt klippes til korrekt pasform efter brugerens fod-størrelse.

Anvendelsesområde: Let dropfod.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Længde	Højde	Ve/Hø
71298	Hvid	Small	24 cm	26 cm	Ve/Hø
71298	Hvid	Medium	27 cm	29 cm	Ve/Hø
71298	Hvid	Large	28 cm	34 cm	Ve/Hø
71298	Hvid	X-Large	30 cm	38 cm	Ve/Hø





ComfortKIT™ 2.0

En blød polstring til ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0 som er specielt udvalgt til følsom hud og til patienter med et meget højt aktivitetsniveau. ComfortKIT™ 2.0 har en indre kerne af såkaldt "memory foam" der bevirker at det naturligt tilpasser sig benets form ved anvendelse. Når materialet hviler genvinder det sin oprindelige form.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	X-Small
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	Small
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	Medium
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	Large
28751	ComfortKIT 2.0	Sort	X-Large
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	X-Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Medium/Large



ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD er en polstring beregnet til Ypsilon® Flow. Den vigtigste egenskab hos ComfortPAD er at mindske friktionen imellem ortosen og benet, især i forbindelse med forskellige aktiviteter, som f.eks. løb, cykling eller gåture. Et ekstra lag af tekstilmateriale mellem ortosen og benet gør at bevægelsen sker lettere imellem de 2 tekstile materialer. Tests har vist, at når to materialer glider mod hinanden reducerer friktion mod huden med omkring 25%. ComfortPAD er One Size og kan tages på og af med en hånd. Det brede bånd er behageligt og medfører mindre tryk på bagsiden af benet. En praktisk løsning for dem, der har et følsomt underben eller hud og ønsker at være aktive.

Anvendelsesområde: Passer kun til Ypsilon® Flow ½.

Art. nr.	Beskrivelse	Størrelse
28886	Ypsilon® Flow ComfortPAD	One Size

CoverKIT™ 2.0

CoverKIT™ 2.0 er en helt ny smart polstring fra Allard AFO. CoverKIT passer til ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0. Enkelt at tage på og af. Giver en glat overflade, der går hele vejen ned til slutningen af skinnen. Indersiden er som en SoftKIT™ og hvis eventuelt ekstra aflastning behøves indgår der også to lodrette neoprenstave for at oprette en trykfri kanal for tibia. Ortosens standard bånd kan bruges sammen med CoverKIT™.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Omkreds læg
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	X-Small	31 - 34 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	Small	34 - 37 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	Medium	37 - 41 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	Large	41 - 46 cm
28765	CoverKIT™ 2.0	Sort	X-Large	46 - 51 cm





Ekstra bånd Allard AFO 2.0, 2½ & Addition

Separate bånd med eller uden D-ring til Allard AFO modellerne 2.0 og 2½.
Båndet kan monteres med åbning medialt eller lateralt.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Pakke
28760	Enkle bånd	Sort	X-Small	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	Small	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	Medium	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	Large	1 sæt
28760	Enkle bånd	Sort	X-Large	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	X-Small	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	Small	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	Medium	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	Large	1 sæt
28761	Bånd med D-ring	Sort	X-Large	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	X-Small	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	Small	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	Medium	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	Large	1 sæt
28763	Bånd med D-ring	Beige	X-Large	1 sæt
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Sort	Small	1 sæt
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Sort	Medium	1 sæt
28768	Enkle bånd, ToeOFF®Short	Sort	Large	1 sæt

SoftKIT™ 2.0

SoftKIT™ 2.0 er en behagelig og smidig til ToeOFF® 2.0, Flow og BlueROCKER® 2.0. Tibiakammen kan eventuelt aflastes ved at anvende neoprenstaverne mellem ortosen og polstringen. Hver pakke indeholder to polstringer og to neoprenstænger.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28750	SoftKIT 2.0	Sort	X-Small
28750	SoftKIT 2.0	Sort	Small
28750	SoftKIT 2.0	Sort	Medium
28750	SoftKIT 2.0	Sort	Large
28750	SoftKIT 2.0	Sort	X-Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Medium
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Large
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	X-Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Small
28752	Mikrofix dropper 2.0	Sort	Medium/Large/X-Large
28753	Neoprenstave 2.0	Sort	Small
28753	Neoprenstave 2.0	Sort	Large
28754	Mikrofix vinger 2.0	Sort	One size



SoftKIT™ Short

SoftKIT™ er en behagelig og smidig polstring beregnet til ToeOFF®. Tibiakammen kan let aflastes ved at anvende de medfølgende neoprenstave mellem ortose og polstring. Hver pakning indeholder to polstringer, to neoprenstave og selvhæftende Mikrofix.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28391	SoftKIT™ Short	Sort	Small
28391	SoftKIT™ Short	Sort	Medium
28391	SoftKIT™ Short	Sort	Large
28356	Mikrofix dropper	Sort	Small
28356	Mikrofix dropper	Sort	Medium
28356	Mikrofix dropper	Sort	Large
28357	Mikrofix vinger	Sort	One size





T-Strap

T-Strap trækkes over talocrural/subtalar-leddet lateralt, for at få på ret position tilbage under tibia. Den distale del af T-Strap hæftes på undersiden af ortosens fodplade og den proximale del rundt om anklen og mod ortosens laterale skinne. Produktet er let at justere i længden og inderkernen af plastazote kan enkelt varmes op med varmepistol ved behov af at justere pasformen. Ydermaterialet er blødt, ventilerende men samtidigt støttende.

Anvendelsesområde: Pes valgus kontrol.

Kontraindikationer: Ødem, dårlig blodcirkulation, hud opblødning eller andre tilstande som yderligere kan forværres af kompression.

Øvrigt: T-Strap er kun beregnet til at anvende sammen med produkter fra Allard AFO og altid sammen med et individuelt tilpasset sål/indlæg for en korrekt positionering af foden. Hvis T-Strap anvendes uden sål/indlæg øges stressen på produktens laterale skinne og derved øges risiko for delaminering.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28777	Sort	One Size	Ve/Hø



Blød AFO bånd

Et dobbeltvævet blødt bånd med let elasticitet for øget smidighed. Velegnet til forskellige ortoseapplikationer. Hæfter mod hård velcro.

Kan klippes i ønsket bredde uden at det trævler.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde	Pakke
25060	Sort	40 mm	10 m	1 rulle
25061	Sort	50 mm	10 m	1 rulle





KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ er i modsætning til KiddieGAIT® mere fleksibel i fodpladens hæl- og tåbox og giver et større bevægelseomfang. KiddieFLOW™ er baseret på samme principper som vores voksne FLOW-modeller og bevarer den samme geometri som KiddieGAIT® og KiddieROCKER®. Ortoesen støtter fodens dorsalfleksion i svingfasen, giver en bedre kontrol i fodpositionering i den sene svingfase og forbedre stabiliteten i støttefasen.

Samtidigt giver det blødere fodblad en lettere afvikling i slutningen af støttefasen. Ved en kombination af øget A/P og M/L kontrol kan KiddieFLOW™ som tillæg til vores andre børnemodeller også kombineres med individuelle indlæg eller SMO.

Anvendelsesområde: Dropfod. KiddieFLOW™ er beregnet til at støtte ved en dropfod, gangafvigelse efter proprioceptiv lidelse, ustabil gang eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer: Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerbare pes valgus- eller pes varus-fejlposition. KiddieFLOW ska ikke bruges til børn med crouch-gang.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28891	KiddieFLOW™	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28892	KiddieFLOW™ m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® tilbyder en tidlig dynamisk ortosebehandling som kan hjælpe barnet til et jævner og et mere naturligt biomekanisk gangmønster. Ortosen hjælper barnet igennem svingfasen og kontrollerer fodens bevægelighed i flere niveauer igennem stødfasen. Skinnens placering på forsiden af tibia er til hjælp ved andre proximale problemer, som fx. hyperextension i knæet eller "Crouch"-gang. KiddieGAIT® er beregnet i kombination med en individuel fodpasning for at kontrollere fodens position. KiddieGAIT® Baby findes i tre størrelser og passer til børn fra ca 9 måneders alderen.

Anvendelsesområde: Dropfod. Forandring i gangmønster som følge af proprioceptive forstyrrelser, tågænger med intakt mellemfod. Crouch-gang som følge af lav tonus (fleksion i hofte/knæ/ankel. Spina Bifida, Cerebral Parese. Muskeldystrofi og MMC.

Kontraindikationer: Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerbare pes valgus- eller pes varus-fejlposition. KiddieFLOW ska ikke bruges til børn med crouch-gang.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Small	11 cm	15 cm	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Ve/Hø
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Large	14 cm	20 cm	Ve/Hø



KiddieGAIT®

KiddieGAIT® yder en tidlig ortosebehandling i og med at de fås i Baby modeller fra ca 1 års alderen. Ankel Fod Ortosen (AFO) hjælper barnet med at få mere jævnt og mere naturlig gangmønster. Ortosen hjælper barnet gennem svingfasen og kontrollerer fodens bevægelse i flere plan gennem støtrefasen. Skinnens placering på forsiden af tibia hjælper også til i forhold til andre proksimale problemer, såsom hyperekstension i knæet eller "Crouch" gang. KiddieGAIT® er beregnet til anvendelse i kombination med en individuel fodtilpasning for at kontrollere fodens position.

Anvendelsesområde: Dropfod. KiddieGAIT® er beregnet til at støtte ved dropfod, gangafvigelser efter proprioceptiv lidelse, ustabil gangart eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, Crouch gang med lav tonus ved tilstand som spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer: Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerbare pes valgus- eller pes varus-fejlposition. KiddieFLOW ska ikke bruges til børn med crouch-gang.

Øvrigt: Denne model findes også i et antal varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundesupport for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	Medium	18 cm	25 cm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28900	KiddieGAIT Sort	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28901	KiddieGAIT Sort m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

KiddieROCKER®

KiddieROCKER® er udviklet for at imødekomme behovet for børn med mere omfattende problem end blot dropfod. Barnet kan have bilateral svaghed og ønsker mere stabilitet i støtrefasen. Ligesom andre børnemodeller er KiddieROCKER dynamisk graderet mellem størrelser. Modellen giver også stabilitet i M/L-plan og i A/P-plan.

Anvendelsesområde: Dropfod. KiddieROCKER® er beregnet til at støtte ved dropfod, gangafvigelser efter proprioceptiv lidelse eller gang med lav tonus, tågang uden mellemfodskollaps, crouch gang med lav tonus ved tilstand som spina bifida, cerebral parese og muskelsvind.

Kontraindikationer: Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Begrænset dorsalfleksions evne (behøver mindst +5 graders dorsalfleksion forbi neutral tilstand). Meget rigid struktur i foden. Spastisk quadriceps. Overdreven genu valgum eller genu varum fejltilning. Fikseret/ikke-korrigerbare pes valgus- eller pes varus-fejlposition. KiddieFLOW ska ikke bruges til børn med crouch-gang.

Øvrigt: Denne model findes også i et antal varianter hvor SoftKIT/ ComfortKIT og bånd er monteret ved levering - kontakt kundesupport for mere information om disse modeller.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28902	KiddieROCKER	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28903	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø



KiddieGAIT® SoftKIT™

KiddieFLOW™, KiddieGAIT®, KiddieROCKER® SoftKIT™ er en behagelig og smidig polstring beregnet til anvendelse sammen med KiddieGAIT®. Hver pakning indeholder to polstringer og selvhæftende MikroFix.

Art. nr.	Model	Størrelse
28397	For KiddieGAIT	Baby Small
28397	For KiddieGAIT	Baby Medium
28397	For KiddieGAIT	Baby Large
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Small
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Medium
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Large
28378	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	X-Large
28379	Microfix Drop	Small
28379	Microfix Drop	Medium
28379	Microfix Drop	Large/X-Large





KiddieGAIT® ComfortKIT™

En ny blød polstring til KiddieGAIT®, KiddieFLOW™ og KiddieROCKER® der er specielt velegnet til patienter med prominent tibia, følsom hud men også til personer med højt aktivitetsniveau. ComfortKit™ har en indre kerne af såkaldt "memory foam" der bevirker at det naturligt tilpasser sig benets form ved anvendelse. Når materialet hviler genvinder det sin oprindelige form.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28418	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Small
28418	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Medium
28418	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Large
28418	For KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	X-Large



KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

SoftSHELL™ Baby er en polstring til KiddieGAIT® Baby. Disse størrelser i KiddieGAIT® SoftSHELL skal kompletteres med en SoftKIT™ (28397) i samme. SoftSHELL har en yderside af glat mønstret lycra-materiale der ændrer udseendet og gør at ortosen glider lettere mod tøjet. På denne model er båndet integreret i selve produktet.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28388	Dyr	Blå	Baby Small
28388	Dyr	Blå	Baby Medium
28388	Dyr	Blå	Baby Large
28389	Stjerner	Rosa	Baby Small
28389	Stjerner	Rosa	Baby Medium
28389	Stjerner	Rosa	Baby Large

KiddieGAIT® SoftSHELL™

SoftSHELL™ er en polstring til KiddieGAIT® der beklæder hele ortosen. Indersiden er fremstillet af samme materiale som SoftKIT™. Ydersiden består af et glat mønstret lycra-materiale der giver et andet udseende og bevirker at bukser lettere kan glide mod ortosen. KiddieGAIT® SoftSHELL™ leveres komplett med postring og bånd.

Øvrigt: Mønster kan forandres med tiden.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse
28358	Hjerter	Rosa	Small
28358	Hjerter	Rosa	Medium
28358	Hjerter	Rosa	Large
28358	Hjerter	Rosa	X-Large
28359	Piratmønster	Grå	Small
28359	Piratmønster	Grå	Medium
28359	Piratmønster	Grå	Large
28359	Piratmønster	Grå	X-Large



Bånd til KiddieFLOW, KiddieGAIT og KiddieROCKER

Separate bånd med eller uden D-ring til KiddieFLOW, KiddieGAIT og KiddieROCKER. Båndet kan monteres mediallyt eller lateralt.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Pakke
28373	Bånd KiddieGAIT Baby	Sort	Baby Small	1 sæt
28373	Bånd KiddieGAIT Baby	Sort	Baby Medium	
28373	Bånd KiddieGAIT Baby	Sort	Baby Large	
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Small	
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Medium	
28368	Enkle bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Large	
28369	D-Ring bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Small	
28369	D-Ring bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Medium	
28369	D-Ring bånd KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Sort	Large	





Non Slip material

Et skridsikkert materiale, der ved friktion er perfekt til overflader hvor man ønsker at undgå skrid. Materialet er specielt udviklet til anvendelse på KiddieGAIT® fodplade, for at forhindre at f.eks. en SureStep ortose glider mod den blanke fodplade.OBS! Dette materiale skal ikke anvendes direkte mod huden.

Art. nr.	Farve	Bredde	Længde
28411	Sort	14 cm	1m



Ypsilon® Flow^{1/2} afprøvningsortose

Ypsilon® Flow afprøvningsortose er en Ypsilon® Flow med teksten “Not-For-Resale” inlamineret i ortosen. Vi anbefaler at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af individuel ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Small	23 cm	35,5 cm	Ve/Hø
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Ve/Hø
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	Large	27 cm	37,5 cm	Ve/Hø
28881	Ypsilon Flow ^{1/2} NFR	X-Large	27 cm	38,5 cm	Ve/Hø

ToeOFF® Flow2½ afprøvningsortose

ToeOFF® Flow afprøvningsortose er en ToeOFF® Flow med teksten "Ikke til videresalg" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler første test foretages med støtte eller i en gangbare. Hvis patienten føler ubehag eller smerter bør afprøvningen afbrydes. Ortosen skal bruges sammen med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45





ToeOFF® 2.0 afprøvningsortose

ToeOFF® 2.0 afprøvningsortose er en ToeOFF 2.0® med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Skostørrelse
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	35-38
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	42-45
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	35-38
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	42-45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45

ToeOFF® 2½ afprøvningsortose

ToeOFF® 2½ afprøvningsortose er en ToeOFF 2½ med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.



Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko- størrelse
28981	ToeOFF® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28981	ToeOFF® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28981	ToeOFF® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28981	ToeOFF® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28981	ToeOFF® 2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm		>45



BlueROCKER® afprøvningsortose

BlueROCKER® 2.0 afprøvningsortose er en BlueROCKER® 2.0 med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45



BlueROCKER® 2½ afprøvningsortose

BlueROCKER® 2½ afprøvningsortose er en BlueROCKER® 2½ med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Skostørrelse
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	>45
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm		42-45
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Ve/Hø	32-35
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Ve/Hø	35-38
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Ve/Hø	38-42
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Ve/Hø	42-45
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Ve/Hø	<45

ToeOFF® Short afprøvningsortose

ToeOFF® Short afprøvningsortose er en ToeOFF® Short med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28991	ToeOFF® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28991	ToeOFF® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28991	ToeOFF® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42



BlueROCKER® Short afprøvningsortose

BlueROCKER® Short afprøvningsortose er en BlueROCKER® Short med teksten "Not-for-Resale" inlamineret i ortosen. Vi anbefaler, at første afprøvning sker med støtte eller ved gangbarre. Hvis patienten føler ubehag eller smerte skal afprøvningen afbrydes. Ortosen skal anvendes med polstring.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø	Sko-størrelse
28997	BlueROCKER® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Ve/Hø	32-35
28997	BlueROCKER® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Ve/Hø	35-38
28997	BlueROCKER® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Ve/Hø	38-42



Ypsilon® Flow½ afprøvningsæt

Ypsilon® Flow afprøvningsæt indeholder 6 polstrede Ypsilon® Flow afprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28882	Ypsilon Flow½	6 Stk.





ToeOFF® Flow2½ afprøvningssæt

I ToeOFF® Flow afprøvningssæt indgår 6 polstrede ToeOFF® Flow afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venster og højre i størrelserne small, medium och large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28964	ToeOFF Flow 2½	6 stk.
28965	ToeOFF Flow 2½ m/D-ring	6 stk.



ToeOFF® 2.0 afprøvningssæt

I ToeOFF® 2.0 afprøvningssæt indgår 6 polstrede ToeOFF® 2.0 afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28930	ToeOFF 2.0	6 stk.
28931	ToeOFF 2.0 m D-ring	6 stk.



ToeOFF® 2½ afprøvningssæt

I ToeOFF® 2½ afprøvningssæt indgår 6 polstrede ToeOFF® 2½ afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28984	ToeOFF 2½	6 stk.
28985	ToeOFF 2½ m D-ring	6 stk.

BlueROCKER® 2.0 afprøvningssæt

I BlueROCKER® 2.0 afprøvningssæt indgår 6 polstrede BlueROCKER® 2.0 afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28944	BlueROCKER 2.0	6 stk.
28945	BlueROCKER 2.0 m D-ring	6 stk.



BlueROCKER® 2½ afprøvningssæt

I BlueROCKER® 2½ afprøvningssæt indgår 6 polstrede BlueROCKER® 2½ afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28974	BlueROCKER 2½	6 stk.
28975	BlueROCKER 2½ m D-ring	6 stk.



ToeOFF® Short afprøvningssæt

I ToeOFF® Short afprøvningssæt indgår 6 polstrede ToeOFF® Short afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28992	ToeOFF® Short	6 stk.





BlueROCKER® Short afprøvningsæt

I BlueROCKER® Short afprøvningsæt indgår 6 polstrede BlueROCKER® Short afprøvningsortoser med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-taske består af venstre og højre i størrelserne small, medium og large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Pakke
28998	BlueROCKER® Short	6 stk.



KiddieFLOW™ afprøvningsortose

KiddieFLOW™ afprøvningsortose er en ortose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Den er udelukkende beregnet til at være et hjælpemiddel ved afprøvning inden valg af ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved anvendelse.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28894	KiddieFLOW afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28895	KiddieFLOW m D-ring afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø

KiddieGait® afprøvningsortose

KiddieGait® afprøvningsortose er en ortose med teksten "Not-for-Resale" lamineret i ortosen. Den er udelukkende beregnet til at være et hjælpemiddel ved afprøvning inden valg af ortoseløsning. Ortosen skal være polstret ved anvendelse.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28382	KiddieGait afprøvningsortose	Baby Small	11 cm	15 cm	Ve/Hø
28382	KiddieGait afprøvningsortose	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Ve/Hø
28382	KiddieGait afprøvningsortose	Baby Large	14 cm	20 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGait afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGait afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGait afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28904	KiddieGait afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGait m D-ring afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGait m D-ring afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGait m D-ring afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28906	KiddieGait m D-ring afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø



KiddieROCKER® afprøvningsortose

KiddieROCKER® afprøvningsortose er en ortose med teksten "Not-for-resale". Den er beregnet til at være en hjælp ved afprøvning inden valg af ortoløsning. Ortosen skal være polstret ved anvendelse.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Fodplade længde	Højde	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28908	KiddieROCKER afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	Small	16 cm	22 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	Medium	18 cm	25,7 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	Large	20 cm	29,5 cm	Ve/Hø
28910	KiddieROCKER m D-ring afprøvningsortose	X-Large	21 cm	31,5 cm	Ve/Hø





KiddieFLOW™ afprøvningssæt

KiddieFLOW™ afprøvningssæt indgår 6 polstrede KiddieFLOW afprøvningssortoser med teksten "Not-for-resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne Small, Medium og Large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28896	KiddieFLOW™ afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28897	KiddieFLOW™ m D-ring afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.



KiddieGAIT® afprøvningssæt

I KiddieGAIT® afprøvningssæt indgår 6 polstrede KiddieGait® afprøvningssortoser med teksten "Not-for-resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i en Camp-sportstaske består af venstre og højre i størrelserne Small, Medium og Large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28381	KiddieGAIT Baby afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28907	KiddieGAIT m D-ring afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28905	KiddieGAIT afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.



KiddieROCKER® afprøvningssæt

KiddieROCKER® afprøvningssæt består af 6 polstrede KiddieGAIT® afprøvningssortoser med teksten "Not-for-Resale" indlamineret i ortosen. Sættet der leveres i Camp-sportstaske og består af venstre og højre i størrelserne Small, Medium og Large.

Anvendelsesområde: Ortosen er udelukkende beregnet til kortvarig anvendelse til afprøvning ved valg af ortose.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28911	KiddieROCKER m D-ring afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.
28909	KiddieROCKER afprøvningssæt	Hø+Ve Small, Medium, Large	6 stk.

PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) er udviklet for at aflaste hæl og hælsår ved sengeleje og ved kortere forflytning. Ortosen holder foden i neutralleje ved sengeleje og bibeholder dorsal- og plantarflexion ved forflytning. Justerbar skinne modvirker inad- og udadrotation ved sengeleje. Regulerbar fod-, tå- og lægdel.

Anvendelsesområde: Velegnet ved fx. diabetessår og tryksår.

Øvrigt: Let at tage polstringen ud ved vask.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
71100	PRAFO Standard	Sort	One Size	Bilat.
71110	Ekstra polstring og bånd	Sort	One Size	



Boston Soft AFO

Ankel- og fodortose i rigid plast forét med en blød foam. Beregnet til at forbedre positionering af fod og fodled samt reducere spasticitet. Ortosen har en indbygget hælbeskytter for at lette heling af hælsår. Boston Soft AFO findes i to udførelser med eller uden antirotationsskinner (stabilizer). Den er let at rengøre og kan trimmes med en saks.

Anvendelsesområde: Rygmarvsbrok, muskeldystrofi, CP, traume og hælsår.

Øvrigt: Stabiliseringsskinne kan bestilles i samme størrelser som Boston Soft AFO.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
71151	Uden stabilizer	Barn 1	Bilat.	19-20
71151	Uden stabilizer	Barn 2	Bilat.	21-22
71151	Uden stabilizer	Barn 3	Bilat.	23-24
71151	Uden stabilizer	Barn 4	Bilat.	25-26
71151	Uden stabilizer	Barn 5	Bilat.	27-29
71151	Uden stabilizer	Barn 6	Bilat.	30-31
71151	Uden stabilizer	Voksen A	Bilat.	32-34
71151	Uden stabilizer	Voksen B	Bilat.	35-36
71151	Uden stabilizer	Voksen C	Bilat.	37-39
71151	Uden stabilizer	Voksen D	Bilat.	40-41
71151	Uden stabilizer	Voksen E	Bilat.	42-44
71151	Uden stabilizer	Voksen F	Bilat.	45-46
71152	Beregnet til 71151	Stabiliseringsskinne		





Bebax forfodsortose

Bebax er en innovativ pædiatrisk fodortose designet for at opnå en progressiv og dynamisk korrektion af en Congenital forfodsfejlstilling. Ortosen er et medicinsk accepteret alternativ til gips. Bebax eliminerer almindelige hudproblemer, der kan opstå under gipsen. På undersiden mellem forfoden og hælen er der et led, der gør det muligt at justere vinklen på alle niveauer. Den er lavet af økologisk kunstlæder i overensstemmelse med Øko-TEX Standard 100, fri for krom og latex. Den har lav vægt, en blød polstring og er let at håndtere ved af/på tagnings. Størrelser fra str. 10 1/2 har et ankelbånd for at holde hælen på plads. Ortosen er ikke beregnet til at gå med, dette gælder alle størrelser.

Anvendelsesområde: Congenital forfodsfejlstillinger.

Øvrigt: Størrelse = indersålens længde

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28637	Hvid	7,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	8 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	8,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	9,0 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	9,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	10 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	10,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	11,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	12,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	13,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	14,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	15,5 cm	Ve/Hø
28637	Hvid	16,5 cm	Ve/Hø

SureStep GO SMO

SureStep GO SMO er designet til at afhjælpe mild til svær pronation i forbindelse med hypotoni. Denne SMO anvender omkredskompression til at stabilisere foden og anklen. Den åbne hæl tillader mere af foden at "føle gulvet", hvilket understøtter sensoriske input og postural holdning. For at opnå maksimal funktion bør denne SMO altid bæres sammen med passende fodtøj.

En SureStep SMO anbefales til brug sammen med vores Allard AFO KiddieFLOW™, KiddieGAIT® eller KiddieROCKER® for at fremme gang fra hæl til tå, især for patienter med lav tonus og pronation.

Anvendelsesområde: Mild til svær pronation, hypotoni, triplanar instabilitet under vægtbæring, manglende selvstændig standfunktion, mild tågang.

Kontraindikationer: Hypertension, spasticitet, svær tågang.

Øvrigt: Vægtbegrænsninger: Patienter op til 22,5 kg.
Ortosen leveres parvis.

Art.nr.	Model	Skostørrelse	Antal/pakke
28740	SureStep GO SMO	EU 19	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 20	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 21	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 22	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 23	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 24	1 par
28740	SureStep GO SMO	EU 26	1 par
28741	SureStep GO SMO	EU 27	1 par
28741	SureStep GO SMO	EU 28	1 par
28741	SureStep GO SMO	EU 29	1 par



Surestep™ - Løsninger ved tågang

Indy 2 Stage - Solid

Indikationer:

- Stramme/spastiske plantarflexorer
- Manglende evne til at få foden i 90 graders vinkel med knæet strakt.
- Pronation eller hyperekstension når hælen befinder sig i gulvet.



Indy 2 Stage - Leddet, PLS, Dorsalflexions Assist

Indikationer:

- Stramme/spastiske plantarflexorer
- I stand til til at få foden i 90 graders vinkel med knæet strakt.
- Barnet kan få foden ned uden overdreven pronation eller hyperekstension.



Tågangs SMO

Indikationer:

- Vedvarende tågang
- I stand til at få foden i 90 graders vinkel med knæet strakt.
- Tågang i mere end 50% af tiden (uforandret med sko)
- Vægtforskydning fremad og mangel på lateral tyngdeforskydning
- Sensorisk reduktion.



SMO

Indikationer:

- Vedvarende tågang
- I stand til at få foden i 90 graders vinkel med knæet strakt.
- Tågang i mere end 50% af tiden (uforandret med sko)
- Vægtforskydning fremad og mangel på lateral tyngdeforskydning
- Sensorisk reduktion.



Vigtige overvejelser

- Alder
- Range of motion
- Primære reduktioner
- Grovmotorisk funktionsniveau
- Tågangens andel i % af tiden
- Brug anamnese-historik
- Postural kontrol

SureStep SMO

SureStep er en dynamisk fodortose beregnet til børn. Ortosen kontrollerer fodens og fodleddets pronation hos børn med lav tonus. Koordination og balance forbedres. Kan anvendes med almindelige sko. SureStep er fremstillet af meget let og tynd plast. Fremstilles efter individuelle mål.

Anvendelsesområde: Moderat eller udtalt pronation af fodleddet (plano-valgus) sammen med en af følgende tilstande: lav tonus, slappe ligamenter, forsinket gang, dårlig balance, trætte fødder, hvis barnet undviger at gå.

Kontraindikationer: Kontrakturer- Foden skal nå neutralleje (90°) ved passiv manipulation, forhøjet tonus, spasticitet

Øvrigt: SureStep fremstilles i USA efter mål, hvis I har spørgsmål til måltagningen kontakt jeres bandagist eller kundesupport hos Camp Scandinavia A/S.



Art. nr.	Model	Type	Pakke	Vægt
28633	Surestep SMO, Standard	Målbestilt	Par	op til 36 kg
28634	Surestep SMO, Standard	Målbestilt	Stk.	op til 36 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Valgfri	Stk.	
28733	Toe Walking Ekstension	Valgfri	Stk.	
28734	Club Foot Trim Lines	Valgfri	Stk.	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Valgfri	Stk.	
28635	Måletaske			
93300	Måletaske til udlån			





SureStep BigShot SMO

Selvom mange børn overgår fra SureStep til en mindre ortose, har en del børn fortsat behov for maksimal støtte og stabilitet. Til disse børn har vi udviklet BigShot. Denne ortose har samme fleksibilitet som SureStep og kan anvendes af de børn som er vokset ud af SureStep eller som nærmer sig vægtgrænsen på 36 kg. Det bløde silikone lignende inderhylster gør ortosen behagelig og den ydre fleksible ramme af plast giver en fleksibel støtte.

Anvendelsesområde: Moderat eller udtalt pronation af fodledet (plano-valgus) sammen med en af følgende tilstande: lav tonus, slappe ligamenter, forsinket gang, dårlig balance, trætte fødder, hvis barnet undviger at gå, >36 kg

Kontraindikationer: Kontrakturer- Foden skal nå neutralstilling (90°) ved passiv manipulation, forhøjet muskeltonus, spasticitet

Øvrigt: SureStep BigShot fremstilles i USA efter mål, hvis I har spørgsmål til måltagningen kontakt jeres bandagist eller kundesupport hos Camp Scandinavia A/S. Undtagelsesvis kan en gipsafstøbing være nødvendig. I så fald vil Camp kontakte jer.

Art. nr.	Model	Type	Pakke	Vægt
28636	Surestep Big Shot	Målbestilt	Par	Over 36 kg
28636	Surestep Big Shot	Målbestilt	Stk.	Over 36 kg
28736	Surestep Big Shot Lite	Målbestilt	Par	22 - 40 kg
28737	Surestep Big Shot Lite	Målbestilt	Stk.	22 - 40 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Valgfri	Stk.	
28733	Toe Walking Ekstension	Valgfri	Stk.	
28734	Club Foot Trim Lines	Valgfri	Stk.	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Valgfri	Stk.	

SureStep Advance

Advance er en SureStep som strækker sig op på benets bagside for at hjælpe til med at reducere sagital instabilitet, modvirke dorsifleksion/plantarfleksion, forenkle selvstændig stående og forbedre proprioception sammenlignet med en traditionelle ortose. For øvrigt har ortosen SureSteps alle fordele. Dette unikke system opmuntre barnet til at gå fra assisteret stående til selvstændig stående ved at stabilisere fødderne og anklerne uden at immobilisere dem. Når barnet starter med at flytte sig og opnår behov for øget bevægelighed og lavere profil på ortosen, kan SureStep Advance nemt ændres ud med en SureStep SMO.



Anvendelsesområde: Pronation, lav tonus, instabilitet i tre plan ved belastning, ingen evne til at opretholde et selvstændig stående, mild tågang.

Kontraindikationer: Forhøjet muskeltonus, spasticitet, graverende tågang.

Art. nr.	Model	Pakke
28639	Gips & mål	Par
28639	Gips & mål	Stk.





SureStep Indy 2 Stage

En ortose med et unikt design, udviklet så børn kan opnå sin bevægelsesevne fra flere forskellige niveauer. Ortosen findes i to udførelsesformer; Solid, som er uden led, leddet. Denne unikke tottrinsortose (en ortose inde i en anden ortose) gør det mulig at bruge Surestep uafhængig af AFO'en. Den tillader barnet at flytte sig på flere forskellige måder uden at hæmme den normale muskelfunktion. Når begge ortoser benyttes samtidig, låser SMO'en sig sikkert inde i AFO'en og omdanner derved den dynamiske SMO'en til en AFO som giver stabilitet i tre plan uden at begrænse den normale brug af fodens indre muskulatur. Indy 2 Stage Solid er ideel for børn som trænger proksimal støtte af en AFO, for at opnå et uafhængigt stående, men som forsat har glæde af en SMO for at kunne kravle og tage sig op til stående aktiviteter på korrekt vis. I løbet af tiden som disse børn udvikles og starter med at tage selvstændige trin med sin AFO, kan du forsætte at arbejde med at forbedre bevægelsesmønstre og muskelstyrke med SMO'en for at opnå en smidigere overgang til mindre brug af ortosen. Børn med funktionshindre som leder til at de bliver trættere over dagen, kan starte med at bruge SMO på morgenen for at opretholde sine funktionelle muskelgrupper. Senere på dagen kan AFO-delen tillægges for at opretholde et stabilt og funktionelt gangmønster.

Anvendelsesområde: Hyperton fod og ankel. Hypoton fod og ankel. Barn som trænger hjælp til at flytte sig. Vanskelighed med at opnå et stabilt stående. Sagital og frontal instabilitet/svaghed. Lav proprioceptiv bevisthed.

Kontraindikationer: Ankelkontrakturer som begrænser passiv dorsalfleksion >90 gradersvær spasticitet

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
28631	Solid, Gips & mål		Par
28631	Solid, Gips & mål		Stk.
28260	Leddets, Gips & mål	<18 kg	Stk.
28260	Leddets, Gips & mål	18-40 kg	Stk.

Albue- og hælbeskytter Heelbo™

Elastisk strømpe med trykafastende, udtagelig gelplade der beskytter huden og forebygger tryksår.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pakke
53600	Gul	Small	15-20 cm	1 par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	1 par
53600	Hvid	Large	25-30 cm	1 par
53600	Grøn	X-Large	>30 cm	1 par



ASO® fodledsortose

Stabil fodledsortose med lav profil og stabiliserende snøre fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner tapening og hindrer foden i at supinere. Båndene justeres afhængig af skadens omfang. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillessenen.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet og forebyggende ved idrætsudøvelse.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28188	Uden skinner	Sort	XX-Small	22,5-25 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.
28188	Uden skinner	Sort	XXX-Large	>40 cm	Bilat.



Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen



Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen



ASO® fodledsortose med skinner

Stabil fodledsortose med lav profil og udtagelige plastskinner både medialt- og lateralt og stabiliserende snøre fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner tapening og hindrer foden i at supinere. Båndene justeres afhængig af skadens omfang. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillessenen.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet og forebyggende ved idrætsudøvelse.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28186	Med skinner	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28186	Med skinner	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen



ASO® EVO™

Stabil fodledsortose med lav profil og stabiliserende snøre fortil. De uelastiske nylonbånds placering efterligner tapening og hindrer foden i at supinere/pronere. På ASO EVO giver nylonbåndene omkring calcaneus en større modstand mod inversion/eversion af calcaneus, end standard ASO. Den øverste del er forstærket med en plastmanchet og derved forbedres beskyttelsen mod høje forstuvninger i fodledet. For yderligere komfort har ortosen fået en ny forstærket CoolFlex polstring på indersiden langs med Akillessenen.

Anvendelsesområde: Akut- eller langvarig fodledsinstabilitet, præventivt ved idrætsudøvelse, høje forstuvninger i fodledet og subtalarleds-instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28189	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28189	Sort	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28189	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28189	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28189	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28189	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.

ASO®EVO™ Quatro

Stabil ankelstøtte med endnu lavere profil end ASO EVO. Materialet rundt om mellemfoden er reduceret for ikke at begrænse plantarflexionen. De stumme nylonbånds placering efterligner tapning og hindre foden at supinere/pronere. På EVA Quatro giver nylonbåndet rundt om calcaneus en større modstand mod inversion/eversion af calcaneus end standard ASO. Den øvre del er forstærket med en plastmanchet og derved forbedres beskyttelsen mod højre fodledsforstuvninger. Manchetten er polstret med CoolFlex polstring for en bedre komfort og Skinloc materialet for at undgå glidning.

Anvendelsesområde: Inversion eller eversion ankelforstuvning, høje ankelforstuvninger, medial eller lateral ankel instabilitet, subtalar ledinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28192	Sort	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28192	Sort	Small	27,7-30 cm	Bilat
28192	Sort	Medium	30-32,5 cm	Bilat
28192	Sort	Large	32,5-35 cm	Bilat
28192	Sort	X-Large	35-37,5 cm	Bilat
28192	Sort	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat



Mål: Omfang i cm rundt om hælen, og over vristen

ELEMENTS Stretch Up

ELEMENTS stretch up er beregnet til at anvende om aftenen/natten ved behandling af Plantar Fasciit. Strømpen anvendes om natten eller ved hvile på andre tider af døgnnet. Dette produkt er udelukkende beregnet til anvendelse af én person. Størrelser : Small, Medium og Large. Passer både til højre og venstre fod.

Anvendelsesområde: Anvendes om aftenen/natten ved behandling af Plantar Fasciit.

Kontraindikationer: Cirkulationsproblemer, Åbne sår på ben eller fod, diabetes, ødem, hammertå, hudproblemer, og/eller under graviditet. Strømpen skal ikke anvendes af personer der for nylig har gennemgået operationer i fod og/eller ben.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
34108	Sort	Small	< 20 cm	Bilat.
34108	Sort	Medium	20 - 40 cm	Bilat.
34108	Sort	Large	> 40 cm	Bilat.



Mål: Omkreds læg

Ankelortose Stabil Soft

Stabil fodledsartose med enkle cirkulære bånd. Sidestøtter af Polypropylene er anatomisk formede. Indermateriale af T-foam/skumplast der former sig og følger underbenets kontur. Ortoosen skal anvendes sammen med en stabil sko.

Anvendelsesområde: Akut og langvarig fodledsinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
28184	Sort	One Size	Bilat.





VACO@talus

VACO@talus ankelortose er lavprofileret, let at anvende og tilbyder enestående komfort. Ortosen stabiliserer anklen ved retningsskift og immobiliserer anklen efter skade. Det slanke design gør den let at anvende i skoen og let at justere uden brug af snørebånd. En justerbar talusrem i tre positioner begrænser talusforskydning, og VACO12-puderne, fyldt med styrofoamperler, sikrer fremragende greb om anklen.

Anvendelsesområde: Akutte ledbåndsskader i anklen, efterbehandling af brud i ankelleddet, forebyggelse af ledbåndsskader i ankelleddet samt kompensation for ustabilitet i ankelleddet.

Øvrigt: Hvis du er mellem to størrelser, anbefaler vi at du vælger den mindste størrelse.

Art. nr.	Modell	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
47639	VACOTALUS	X-Small	Ve/Hø	>37
47639	VACOTALUS	Small	Ve/Hø	37-40
47639	VACOTALUS	Medium/Large	Ve/Hø	<40



Airtex ankelortose

Airtex ankelortose giver støtte og kompression under genoptræning efter akutte skader. Ortosen er også velegnet til aktive mennesker, der har brug for ekstra støtte omkring anklen under fysisk aktivitet.

Ortosen giver dynamisk støtte til sener og muskler omkring anklen uden at immobilisere eller reducere ankens funktionalitet, hvilket bidrager til en bedre behandling. Designet med krydsede bånd til mediolateral kontrol af anklen. De to beslag kan justeres individuelt for at regulere kompressionen. Åben hæl for øget komfort.

Ankelortosen er en del af den nye AIRTEX-serie fra PRIM, som er designet med en ny hudvenlig limteknologi, der gør det muligt at sammenføje de forskellige tekstildele uden sømme. Fraværet af tråd og sømme reducerer gnidning på huden og øger komforten for brugeren.

Airtex-produkter er lette med 100% aktiv åndbarhed. Stoffet er designet til at sikre tilstrækkelig ventilation ved aktivt at hjælpe med at fjerne varme og sved, så huden føles frisk, kølig og behagelig.

Anvendelsesområde: Forstuvning. Kontusion og muskelsmerter ustabilitet og stivhed i led. Støtte og beskyttelse i sport.

Art.nr.	Størrelse	Mål	Farve
28194	One Size	18-30 cm	Sort

Gel ankelortose

Ankelortose for immobilisering, køle og kompression for at reducere hævelse efter akut skade i anklen. De anatomisk formede plastdele har puder, der er opdelt i to, en med luft og en med gel. Disse kan fjernes og bruges til kølebehandling. Bredden under foden justeres med velcrobånd. Plastdelen er 25 cm lange. To cirkulære velcrobånd låser ortosen mod benet.

Anvendelsesområde: Akut ankelskader, forstuvninger og langvarig fodledsinstabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28179	Hvid	Onesize	25 cm	Bilat.



Carbon Footplate

Kulfibersålen er designet til at beskytte mtp-leddene og forfoden ved at begrænse bevægelsesområdet (ROM), fordele trykket i forfoden og lette afviklingen. Kulfibersålen kan også anvendes efter immobiliseringsbehandling med en POST-OP-sko eller walker for gradvist at øge bevægelsen. Den kan også anvendes til at forbedre balancen efter tå-amputation, dig.

Bør være dækket af en indersål.

Anvendelsesområde: Hallux Rigidus, Hallux Limitus, stressfrakturer og andre skader eller artrosetilstander i framfoten/mellomfoten, framfotstraume, frostuet tå eller tå-amputation.

Art. nr.	Størrelse	Ve/Hø	Længde	Bredde	Tykkelse
28035	Small	Ve/Hø	235mm	77mm	1,8 mm
28035	Medium	Ve/Hø	255mm	80mm	1,8 mm
28035	Large	Ve/Hø	275mm	90mm	1,8 mm
28035	X-Large	Ve/Hø	305mm	99mm	1,8 mm



Carbon Footplate Rigid

En kulfibersål, der begrænser bevægelsesomfanget (ROM) i de meta-tarso-phalangeale led (MTP-leddene), fordeler trykket i forfoden og letter afviklingen over foden. Bør være dækket af en indersål.

Anvendelsesområde: Kulfibersålen er designet til at beskytte mtp-leddene og forfoden ved at begrænse bevægelsesområdet (ROM), fordele trykket i forfoden og lette afviklingen. Kulfibersålen kan også anvendes efter immobiliseringsbehandling med en POST-OP-sko eller walker for gradvist at øge bevægelsen. Den kan også anvendes til at forbedre balancen efter tå-amputation, dig.

Art. nr.	Størrelse	Ve/Hø	Længde	Bredde	Tykkelse
28036	Small	Ve/Hø	235mm	77mm	2 mm
28036	Medium	Ve/Hø	255mm	80mm	2 mm
28036	Large	Ve/Hø	275mm	90mm	2 mm
28036	X-Large	Ve/Hø	305mm	99mm	2 mm





VACO®ped Xelgo

VACO®ped Xelgo er en ny og banebrydende innovation inden for behandling af akillessenerupturer. Ortosen har alle de kendte fordele ved VACO®ped, men tilbyder en ny indlægssål, som er en videreudvikling af den velprøvede perleteknologi.

Xelgo-indlæggene indeholder perler indlejret i puder, der bindes sammen via viskøse væskebroer. Foden synker ned i indlægget, som tilpasser sig patientens individuelle anatomi – fastgjort og optimalt stabiliseret, omslutter hævelser og aflaster tryk. Takket være Xelgo-teknologien er håndteringen af ortosen nemmere og hurtigere sammenlignet med vakuum- og luftsystemer, hvor man skal håndtere pumper og adskillelse af indlægget under vask. DryClim®-materialet sikrer åndbarhed og ventilation.

Sammenlignende studier har vist samme stabilitet som gips og samme høje evne til trykaflastning. Ortosen tilbyder en bevægelsesradius (ROM) fra -15° til +30°, og designet giver en ægte spidsfodsstilling for fod og ankel ved behandling af akillessenerupturer. Meget tilpasningsdygtig med kun 3 størrelser.

Anvendelsesområde: Ankelledsbrud, metatarsalbrud, akillessenerupturer, calcaneusbrud, svære forstuvninger, proteser og artrodeser.

Øvrigt: Af hygiejniske årsager anbefales det at bruge VACO®ped Xelgo sammen med en vaskbar strømpe. Ortosen leveres med to strømper. Xelgo-strømpen til Vacoped kan også købes separat (varenummer 47664). For yderligere tilbehør, se sektionen "Tilbehør til walkers og diabetesortoser"

Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse	Fotlængde	Forfodsbredde	Omkreds ankel	Omkreds læg
47662	VACOped XELGO	Small	35-40	22-25 cm	10 cm	14-29 cm	29-39 cm
47662	VACOped XELGO	Medium	40-45	25,1-28 cm	12 cm	22-40 cm	35-51 cm
47662	VACOped XELGO	Large	45-50	28,1-31 cm	13 cm	30-45 cm	40-58 cm
47666	XELGO Liner VACOped	Small					
47666	XELGO Liner VACOped	Medium					
47666	XELGO Liner VACOped	Large					

VACO®ped

OPED VACO®ped er en formstøbt, stabil funktionsortose til immobilisering af fod og ankel. VACO®ped har et bredt bevægelsesområde og giver mulighed for en ægte Equinus-position af fod og ankel ved behandling af akillessenerupturer og har vist sig at forkorte patientens restitutionstid med 3,5 uger.

OPED's patenterede vakuumteknologi er det moderne alternativ til gips. En pude fyldt med tusindvis af skumplast-perler der omgiver den skadede kropsdel. Når luften suges ud af puden ved hjælp af en pumpe, bliver den hård (som et plaster). Vakuumpuden tilpasser sig perfekt til den enkelte patients anatomi og kan justeres for at tage højde for hævelse og atrofi. Tilbyder et valg af bevægelsesområde (ROM) fra -15° til +30°. Kan tilpasses med kun 3 størrelser. Udskiftelige indlæg og komfort og aftagelig sål for bedre hygiejne. Røntgengennemsigtig .

Anvendelsesområde: Konservativ og operativ akillessenerereparation (ATR), dynamisk behandling af ankelbrud, ankelledsbrud, metatarsalbrud, akillessenerupturer, calcaneusbrud, alvorlige forstuvninger, proteser, artrodeser

Øvrigt: VACO®ped-sæt: 1x sko klar til brug, 1x ekstra polstring, 1x akillessål 30°, 1x vakuumpumpe.

VACO®ped sæt for længere brugstid: 1x akillessål 30°, 1x gangsål, 1x vakuumpude, 2 x frottépolstring, 1x monteringsnøgle



Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse	Omkreds læg	Omkreds ankel	Forfodsbredde	Fodlængde
47632	VACOped	Small	35-40	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
47632	VACOped	Medium	40-45	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
47632	VACOped	Large	45-50	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
47642	VACOped sæt - for længere anvendelsestid	Small	35-40	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
47642	VACOped sæt - for længere anvendelsestid	Medium	40-45	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
47642	VACOped sæt - for længere anvendelsestid	Large	45-50	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
47650	Dorsum trykafastende pude	Small					
47650	Dorsum trykafastende pude	Medium					
47650	Dorsum trykafastende pude	Large					
47655	Akilles-sål 15-30 grader	Small					
47655	Akilles-sål 15-30 grader	Medium					
47655	Akilles-sål 15-30 grader	Large					
47658	Ekstra polstring	Small					
47658	Ekstra polstring	Medium					
47658	Ekstra polstring	Large					



VACO® pedes Xelgo

OPED VACO® pedes Xelgo tilbyder immobilisering af forfoden med fuld bevægelighed i anklen og optimal trykaflastning omkring forfoden og mellemfoden. Xelgo-indlægget er en ny og banebrydende innovation og en videreudvikling af den velprøvede Oped bead-teknologi. Indlæggene indeholder perler indlejret i puder, der binder sig sammen via viskøse væskebroer. Foden synker ned i indlægget, som tilpasser sig patientens individuelle anatomi – fast og optimalt stabiliseret, indkapsler hævelse og aflaster trykket.

DryClim®-materialet sikrer åndbarhed og ventilation. Håndteringen af ortosen er lettere sammenlignet med vakuum- og luftsystemer takket være XELGO-teknologien. Sammenligningsstudier har vist samme gipstabilitet og samme høje kapacitet til trykaflastning. Den rullende sål fører til et fysiologisk og sikkert gangmønster. Meget tilpasningsdygtig med kun 3 størrelser.

Anvendelsesområde: Metatarsale frakturer I - IV, Hammer- og klo-tæer, Hallux valgus / rigidus, Lapidus Operation, Arthrodeese af metatarsale led.

Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse	Fotlængde	Forfodsbredde	Omkreds ankel	Omkreds læg
47663	VACOPedes XELGO	Small	Small	22-25 cm	10 cm	14-29 cm	29-39 cm
47663	VACOPedes XELGO	Medium	Medium	25,1-28 cm	12 cm	22-40 cm	35-51 cm
47663	VACOPedes XELGO	Large	Large	28,1-31 cm	13 cm	30-45 cm	40-58 cm
47667	XELGO Liner VACOPedes	Small					
47667	XELGO Liner VACOPedes	Medium					
47667	XELGO LINER VACOPedes	Large					

VACO®pedes

OPED VACO®pedes giver immobilisering af forfoden med fuld ankelmobilitet og optimal trykaflastning i for- og mellemfoden. Vakuumpuden sikrer optimal og individuel tilpasning, selv i tilfælde af hævelse, og giver høj stabilitet. Den rullende sål fremmer et fysiologisk og sikkert gangmønster.

OPED's patenterede vakuumteknologi er et moderne alternativ til gips. En pude fyldt med tusindvis af skumplast-perler som omslutter den skadede kropsdel. Når luften suges ud af puden med en pumpe, bliver den hård som gips. Vakuumpuden former sig perfekt efter patientens anatomi og kan justeres for at tilpasse sig hævelse og muskelatrofi.

Den kan tilpasses med kun tre størrelser. Udskiftelige indlæg for bedre hygiejne og komfort og en aftagelig sål for bedre rengøring. Røntgengennemtrængelig.

Anvendelsesområde: Metatarsale frakturer I - IV, Hammer- og klo-tæer, Hallux valgus / rigidus, Lapidus-kirurgi, Arthrodesse af metatarsale led

Øvrigt: VACO®pedes-sæt: 1 x sko klar til brug, 1 x ekstra inderfor, 1 x vakuumpumpe. VACO®pedes-sæt til længere brug: 1 x gangsål, 1 x vakuumpude, 2 x inderfor i frotté



Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse	Omkreds læg	Omkreds ankel	Forfodsbredde	Fotlængde
47634	VACOpedes	Small	35-40	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
47634	VACOpedes	Medium	40-45	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
47634	VACOpedes	Large	45-50	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
47643	VACOpedes sæt - for længere anvendelsestid	Small	35-40	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
47643	VACOpedes sæt - for længere anvendelsestid	Medium	40-45	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
47643	VACOpedes sæt - for længere anvendelsestid	Large	45-50	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
47659	Ekstra polstring	Small					
47659	Ekstra polstring	Medium					
47659	Ekstra polstring	Large					



VACO®cast

OPED VACO®cast er en ortopædisk fraktursko med fast fleksion, der er formet og konstrueret til at hjælpe med at fremskynde helingen og samtidig give optimal komfort. Behandling med VACO®cast fremskynder helingsprocessen.

OPED's patenterede vakuumpumpe er det moderne alternativ til gips. En pude fyldt med tusindvis af skumplast-perler som omgiver den skadede kropsdel. Når luften suges ud af puden ved hjælp af en pumpe, bliver den hård som gips. Vakuumpuden tilpasser sig perfekt til den enkelte patients anatomi og kan justeres for at tage højde for hævelse og atrofi. Undgår tryk på kropsstedet og giver stabilitet takket være en perfekt formet ortose hver gang. Den lette, men meget stabile plastskaft giver ortosen den nødvendige støtte. Kan bruges umiddelbart efter operationen i stedet for en gips.

Justerbar i lægbredden. Støvlen har en bevægelig tåplade til at forlænge plantarfoden og en udtagelig sål for lettere rengøring. Kan tilpasses med kun 3 størrelser. Røntgengennemtrængelig.

Anvendelsesområde: Fod- og ankelfrakturet, metatarsalfrakturet, calcaneusfrakturet, alvorlige ledbåndsskader, proteser, arthrodeser.

Øvrigt VACO®cast-sæt: 1 x sko, der er klar til brug, 1 x vakuumpumpe.
Se mere tilbehør under »Tilbehør til walkers og diabetiske ortoser«

Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse	Omkreds læg	Omkreds ankel	Forfodsbredde	Fodlængde
47635	VACOCast	S	35-40	29-39 cm	14-29 cm	10 cm	22-25 cm
47635	VACOCast	M	40-45	35-51 cm	22-40 cm	12 cm	25,1-28 cm
47635	VACOCast	L	45-50	40-58 cm	30-45 cm	13 cm	28,1-31 cm
47658	Ekstra polstring	S					
47658	Ekstra polstring	M					
47658	Ekstra polstring	L					

VACO®cast Diabetic

OPED VACO®cast Diabetes imiterer "the Golden Standard" i forhold til aflastning med TCC (Total Contact Cast) til diabetiske fodsår. Det er en ortopædisk fraktursko med fast fleksion, formet og konstrueret til at støtte en hurtig genoptræning samtidig med at den yder optimal komfort.

Indersålen er udstyret med OPEDs patenterede vakuumteknologi, som er den moderne erstatning for gips og en integreret del af VACO®-produkter. En pude fyldt med tusindvis af skumplast-perler omkranser den skadede kropsdel. Når luften suges ud af puden ved hjælp af en pumpe, bliver den hård (som et gips) på få sekunder. Ved at åbne ventilen og lade luft strømme ind i puden, bliver den blød igen, hvilket muliggør justering til kropsdelen.

VACO®cast Diabetes er udstyret med ekstra VACO®-puder for øget støtte og holdbarhed ved vægtbærende aktiviteter. Den har en friktionsfri velourforing, der mindsker friktion og er skånsom mod følsom hud, i en sort farve der skjuler sekreter og fugtpletter. Produktet er klinisk bevist at fremme vellykket sårheling takket være fremragende trykaflastning. Det muliggør nem inspektion af såret og forenkler behandlingen.

En låsbar spænde muliggør bedre overholdelseskontrol, og den integrerede rullensål sikrer god trykfordeling samt en sikker og fysiologisk gang.

VACO®cast Diabetes leveres med tåbeskytter for både hygiejne og ekstra beskyttelse samt en formbar skumindersål for yderligere aflastning. Fås i 3 størrelser.

Anvendelsesområde: Sår på foden, diabetiske fodsår, postoperativ pleje efter tå- og fremfodsamputationer samt diabetisk neuro-osteopati (DNOAP) eller Charcot-fod.



Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse	Omkreds læg	Omkreds ankel	Forfodsbredde
47636	VACOCast Diabetes	S	35-39	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
47636	VACOCast Diabetes	M	39-43	35-51 cm	35-51 cm	12 cm
47636	VACOCast Diabetes	L	43-49	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
47644	VACOCast Diabetes sæt- for længere anvendelsestid	S	35-39	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
47644	VACOCast Diabetes sæt- for længere anvendelsestid	M	39-43	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
47644	VACOCast Diabetes sæt- for længere anvendelsestid	L	43-49 cm	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
47651	Foderforlængelse - læg					
47652	Foderforlængelse - ankel					
47653	Ekstra polstring, tåkappe	S	35-39 cm	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
47653	Ekstra polstring, tåkappe	M	39-43	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
47653	Ekstra polstring, tåkappe	L	43-49	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
47657	Ekstra polstring	S	35-39	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
47657	Ekstra polstring	M	39-43 cm	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
47657	Ekstra polstring	L	43-49 cm	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm



VACO®pedes Diabetic

VACO®pedes Diabetes er fremstillet for at immobilisere forfoden med en diabetikervenlig foring og hjælper med at fremskynde heling, samtidig med at den giver optimal komfort. Med sin lave højde og indbyggede bevægelsesomfang gør den det lettere at gå og er især velegnet til dem, der har svært ved at bruge en høj støvle.

Foringen anvender OPED's patenterede vakuumteknologi, som er en moderne erstatning for gips og en integreret del af VACO-produktlinjen. En pude fyldt med tusindvis af skumplast-perler der omgiver det skadede område. Når luften suges ud med en pumpe, bliver puden hård på bare nogle få sekunder. VACO®pedes Diabetes har ekstra volume af

VACO®-puder for øget støtte og elasticitet under vægtbærende aktiviteter. Foret er lavet af forskydningsfri velour, der mindsker friktion og er skånsom mod følsom hud, i sort farve for at skjule væske- og fugtmærker.

VACO®pedes Diabetes er klinisk dokumenteret til effektiv sårheling, giver en god trykaflastning og letter sårinspektion og -behandling. Den er udstyret med låsbare spænder for bedre justering og en vippesål for god trykfordeling og en sikker fysiologisk gang.

Skoen tillader fri bevægelse i fodleddet og leveres med en tåclips til beskyttelse og en formbar skumindlægssål til yderligere aflastning. Den kan tilpasses og fås i tre størrelser.

Anvendelseområden: Sår på foden, diabetiske fodsår, postoperativ pleje efter tåamputationer.

Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse	Omkreds ankel	Forfodsbredde
47637	VACO®pedes Diabetes	S	35-39	14-29 cm	10,5 cm
47637	VACO®pedes Diabetes	M	39-43	22-40 cm	12 cm
47637	VACO®pedes Diabetes	L	43-49	30-45 cm	13,5 cm
47645	VACOpedes Diabetes sæt- for længere anvendelsestid	S	35-39	14-29 cm	10,5 cm
47645	VACOpedes Diabetes sæt- for længere anvendelsestid	M	39-43	22-40 cm	12 cm
47645	VACOpedes Diabetes sæt- for længere anvendelsestid	L	43-49	30-45 cm	13,5 cm
47654	Indersål af skum	S	35-39	14-29 cm	10,5 cm
47654	Indersål af skum	M	39-43	22-40 cm	12 cm
47654	Indersål af skum	L	43-49	40-58 cm	13,5 cm
47660	Velourforing	S	35-39	14-29 cm	10,5 cm
47660	Velourforing	M	39-43	22-40 cm	12 cm
47660	Velourforing	L	43-49	30-45 cm	13,5 cm

VACO®paso Free

Oped VACO®paso Free er en færdig behandlingssko til lindring af fodrehabilitering og diabetiske fodsår. Den kan anvendes som nedtrappingsbehandling efter TCC-behandling med VACO®cast Diabetic. Skoen har en opbygget tre-lags sålesystem. Øverst er der justerbare VACO12-indersål, som er fyldt med små kugler og kan tilpasses optimalt efter fodsålen. Fodens kontaktflade er maksimeret, hvilket muliggør optimal trykfordeling. Takket være det andet lag af skummateriale, som delvist kan fjernes, kan der yderligere gives trykaflastning på problemområder på foden. Nederst har du en ekstremt stiv sål, som er meget stabil og minimerer gnævning samt giver et fast støtte.

Skoen har en ydersål med rullende form for et fysiologisk gangmønster, hvilket gør det muligt for patienten at stå sikkert. Det innovative hælstabilitetssystem tilbyder optimal støtte med så meget plads som muligt til foden og forbindinger i hælen. Skoen muliggør nem sårinspektion, velcrobåndene kan åbnes helt smertefrit for at placere foden. Lavt opbevaringsbehov, kan bæres på højre eller venstre fod med et reversibelt rem-system.



Anvendelsesområde: Sår på foden, diabetiske fodsår, postoperativ pleje efter tåamputationer.

Art.nr.	Modell	Størrelse	Skostørrelse	Fodlængde
47638	VACOpaso Free	XS	37-38	24,5 cm
47638	VACOpaso Free	S	39-40	26 cm
47638	VACOpaso Free	M	41-42	27 cm
47638	VACOpaso Free	L	43-44	28 cm
47638	VACOpaso Free	XL	45-46	29,5 cm
47638	VACOpaso Free	XXL	47-48	31 cm

OPED regnslag

Regnslaget beskytter mod fugt og snavs. Dette produkt omslutter ortosens sål og kan nemt trækkes på ved hjælp af et elastisk håndtag.

Øvrigt: Supplerer VACO®ped, VACO®pedes, VACO®ped diabetic, VACO®pedes diabetic, VACO®cast, VACO®cast diabetic og andre ortoser.

Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse
47641	OPED Regnslag	Small	34-38
47641	OPED Regnslag	Medium	39-43
47641	OPED Regnslag	Large	44-46



OPED vakuumpumpe

Vakuumpumpen er designet til at fjerne luft fra Opeds patenterede indrefor med vakuumteknologi, som anvendes i flere af deres produkter.

Art.nr.	Model
47649	Vakuumpumpe






OPED Click Disc

En smart vægtbærende indikator, der kan guide patienten til, hvor meget belastning de kan lægge på den skadede fod, mens de bruger en walker. Lastcellen består af tre klikskiver, der kan placeres direkte i ortosen. Hver klikskive er indstillet til en specifik maksimal belastningsgrænse. Hvis patienten lægger mere vægt på foden end det antal kilo, der angives, vil patienten høre en klikkende lyd (som en klikker). Denne lyd er et klart signal om, at patienten er ved den øvre vægtgrænse.

- Rød belastningsmålerkategori A: ca. 10 - 30 kg belastning.
- Gul belastningsmålerkategori B: ca. 20 - 40 kg belastning.
- Grøn belastningsmålerkategori C: ca. 30 - 50 kg belastning.

Øvrigt: Komplementært til VACOPed, VACOcast og VACOPedes.

Art.nr.	Model	Pakke
47647	Click Disc	1 sæt

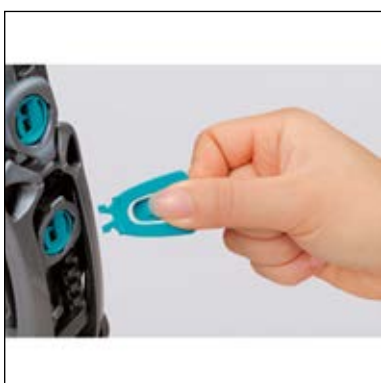

OPED monteringsnøgle

5 pakker med monteringsnøgler til justering af VACOPeds bevægelsesområde.

Øvrigt: Kompatibel med VACO®Ped Trauma og VACO®ped Diabetes.

Art.nr.	Model
47648	Monteringsnøgle



OPED EVENUp

EVENUp skoforhøjelse hjælper med at udligne forskellen i benlængden hos patienter og reducere kropsbelastningen under gang med ortopædiske gangstøtter eller gips. Den korrigerer højdeforskellen mellem det raske og det skadede ben. Den har et aftageligt indlæg, som giver enten 1,3 cm eller 2,6 cm løft. Løftet, som placeres på tenniskoen, gør, at dens højde bliver sammenlignelig med en ortopædisk gangstøvl. Størrelsen bestemmes ud fra længden af den sko, der skal bæres i EVENUp. Bemærk: Det er generelt bedst at vælge en EVENUp, der er lidt for lille fremfor lidt for stor.

Anvendelsesområde: Midlertidig bækkenfejlstilling, forårsaget af brug af ortose eller gips.

Øvrigt: Kan bruges til venstre og højre fod.

Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse
47640	EVENUP	S	34-38
47640	EVENup	M	39-43
47640	EVENup	L	44-46

OPED gangsål 0°

Standard gangrulle sål til OPED VACO® walkers. Sålen har en blød kurve, der forsigtigt 'vugger' foden for at muliggøre lettere gang.

Mål: Vælg størrelse i henhold til den respektive størrelse på Walker.

Øvrigt: Kompatibel med VACO®ped, VACO®ped Diabetes, VACO®cast og VACO®cast Diabetes.

Art.nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse
47656	Gangsål 0° grader	S	35-40
47656	Gangsål 0° grader	M	40-45
47656	Gangsål 0° grader	L	45-50



OPED Strap Lock

Strap Lock låser walkeren og sikrer patientens compliance og behandlingsresultater. Den medfølgende nøgle kan åbnes til f.eks. sårforbinding og sættes på igen bagefter. Remlåsen er kompatibel med VACOCast Diabetes og VACOPed Diabetes.

Øvrigt: Pakken indeholder 1x lås, 1x nøgle, 2x bånd.

Art.nr.	Model	Pakke
47646	Strap Lock	1x lås, 1x nøgle, 2x bånd.



Xelgo Stocking Vacoped & Vacopedes

Xelgo-sokken fungerer som en ekstra beskyttelse mellem huden og vandrestøvlen. Den er nem at skifte, så det er nemt at holde både hud og støvle rene. Sokken kan vaskes og reducerer sved takket være det hurtigtørrende syntetiske materiale. Det særlige vævemønster giver høj elasticitet uden kompressionseffekt. Strømpen har ingen sømme, der kan give tryk eller gnidning, og den optimale pasform betyder, at der ikke opstår folder.

Art.nr.	Modell	Färg	Storlek	Förpackning
47664	Xelgo Stocking Vacoped	Grå	One Size	1 st
47665	Xelgo Stocking Vacopeded	Grå	One Size	1 st





Solid Back Walker long

Immobiliserende walker i høj model. Ortosen er let og har et stabilt design med en lukket bagkant hele vejen op og en rigid forkant for at styrke immobiliseringen. Den er designet med ekstra polstring over anklen for at give ekstra stabilitet.

Der er inkluderet to ekstra kondylpuder, som aflaster trykket og giver ekstra komfort. Walker's liner fungerer som en blød, luftgennemtrængelig og vaskbar polstring. Den beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Rullesål med anti-slip giver en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Produktet er tilpasset til kilesystemer, er røntgengennemsigtigt og let at afprøve. Indeholder ikke latex.

Anvendelsesområde: Ankelforstuvning i grad 2/3. Stabil fraktur på distale fibula, distale tibia, talus, calcaneus og metatarsale knogler. Post-fodskade. Post OP.

Øvrigt: Højden i størrelse Medium er 42 cm.

Art.nr.	Model	Størrelse	Længde indersål
47620	Solid Back Walker - Long	S	25 cm
47620	Solid Back Walker - Long	M	28 cm
47620	Solid Back Walker - Long	L	30 cm
47620	Solid Back Walker - Long	XL	32 cm
47621	Liner	S	n/a
47621	Liner	M	n/a
47621	Liner	L	n/a
47621	Liner	XL	n/a

Walker Protect Fixed, lav

Immobiliserende walker i høj model, lavet af formsprøjtet polypropylen, i letvægt, holdbart og stabilt design. Walkeren har to faste sidestøtter, der giver god stabilitet til fod og ankel, to rigide stive buer, en fortil og en bagtil, samt en polstring over anklen for at styrke immobiliseringen. Walkerens indre polstrede tekstil er foret med blødt, lufttrængeligt og vaskbart velourstof, som beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Leveres med to ekstra kondylpuder til at lindre trykket og give ekstra komfort. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Kilesystem kan anvendes. Røntgen gennemtrængelig. Let at montere.



Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer, akut fodledsdistorsion, akillesseneruptur, bløddelsskader og postoperativ immobilisering.

Øvrigt: Høj 27 cm

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde indersål
47609	Protect Fixed lav	Small	25 cm
47609	Protect Fixed lav	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed lav	Large	32 cm
47612	Ekstra båndsat	One size	
47616	Ekstra polstring	Small	
47616	Ekstra polstring	Medium	
47616	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sæt	Small	
47617	Kiler, sæt	Medium	
47617	Kiler, sæt	Large	
47618	Tåbeskytter	One size	



Walker Protect Fixed, høj

Immobiliserende walker i høj model, lavet af formsprøjtet polypropylen, i letvægt, holdbart og stabilt design. Walkeren har to faste sidestøtter, der giver god stabilitet til fod og ankel, to rigide stive buer, en fortil og en bagtil, samt en polstring over anklen for at styrke immobiliseringen. Walkerens indre polstrede tekstil er foret med blødt, lufttrængeligt og vaskbart velourstof, som beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Leveres med to ekstra kondylpuder til at lindre trykket og give ekstra komfort. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Kilesystem kan anvendes. Røntgen gennemtrængelig. Let at montere.

Anvendelsesområde: Stabile fod- og fodledsfrakturer, akut fodledsdistorsion, akilleseneruptur, bløddelsskader og postoperativ immobilisering.

Øvrigt: Høj 42 cm

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde indersål
47608	Protect fixed høj	Small	25 cm
47608	Protect fixed høj	Medium	29 cm
47608	Protect fixed høj	Large	32 cm
47611	Ekstra bånd sæt	One size	
47615	Ekstra polstring	Small	
47615	Ekstra polstring	Medium	
47615	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sæt	Small	
47617	Kiler, sæt	Medium	
47617	Kiler, sæt	Large	
47618	Tåbeskytter	One size	

Walker AIR høj

Immobiliserende walker, lavet af formsprøjtet polypropylen, i et letvægt, holdbart og stabilt design. Med et integreret luftsystem kan du gradvist øge/ mindske immobilisering efter behov. Ortosen har to faste metalstøtter, som stabiliserer fod og ankel. Polstringen er foret med et blødt, lufttrængeligt og vaskbart velourstof, der beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Ekstra polstring, bånd-sæt og tåbeskyttere kan bestilles. Kilesystem kan anvendes. Let at montere.



Øvrigt: Høj Small 35 cm. Høj Medium, Large 42 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Skostørrelse
47607	Walker Air høj	Small	34-38
47607	Walker Air høj	Medium	39-42
47607	Walker Air høj	Large	43-45
47607	Walker Air høj	X-Large	45-48
47610	Ekstra bånd-sæt	Small	
47610	Ekstra bånd-sæt	Medium/Large	
47614	Ekstra polstring	Small	
47614	Ekstra polstring	Medium	
47614	Ekstra polstring	Large	
47617	Kiler, sæt	Small	
47617	Kiler, sæt	Medium	
47617	Kiler, sæt	Large	
47618	Tåbeskytter	One size	

Walker hækile

Kilsystem sæt med 6 stk. hver giver en vinkel fra ca. 4°. I alt op til 20°. Fås i tre størrelser.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
47617	Hælkil sæt	Small	6 Stk.
47617	Hælkil sæt	Medium	6 Stk.
47617	Hælkil sæt	Large	6 Stk.





Walker ROM høj

Immobiliserende walker, lavet af formsprøjtet polypropylen, i letvægtsmateriale og holdbart, stabilt design. Ortosen har to faste metalstøtter, som stabiliserer fod og ankel og med et integreret luftsystem kan du gradvist øge/mindske immobilisering efter behov. ROM kontrol som tillader progressiv mobilisering imellem 45° plantar fleksion og 30° dorsal fleksion med et interval på 7,5°. Kan låses ved 0°, 10° og 20° plantar fleksion.

Polstringen er foret med et blødt, åndbart og vaskbart velourstof, der beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Ekstra polstring, bånd og tåbeskytter kan bestilles. Let at montere.

Anvendelsesområde: Akut forstuvet ankel, Bløddelsskade, distale stressfrakturer på skinneben, stabile frakturer på fod og ankel, akillensene operationer, immobilisering af ankel- og tåled, rehabilitering af ankelled, Post-ORIF ankelkirurgi.

Øvrigt: Højde Small 35 cm. Højde Medium og Large 42 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Længde	Skostørrelse
47606	Walker ROM høj	Small	35 cm	34-38
47606	Walker ROM høj	Medium	42 cm	39-42
47606	Walker ROM høj	Large	42 cm	43-45
47606	Walker ROM høj	X-Large	42 cm	45-48
47610	Ekstra bånd sæt	Small		
47610	Ekstra bånd sæt	Medium/Large		
47613	Ekstra polstring	Small		
47613	Ekstra polstring	Medium		
47613	Ekstra polstring	Large		

Walker Fixed høj

Immobiliserende walker i høj model, lavet af formsprøjtet polypropylen, i letvægt, holdbart og stabilt design. Walkeren har to faste sidestøtter i metal, der giver god stabilitet til fod og ankel. Walkerens indre polstrede tekstil er foret med blødt, åndbart og vaskbart velourstof, som beskytter mod stød og sikrer optimal komfort. Latex fri. Leveres med to ekstra kondylpuder til at lindre trykket og give ekstra komfort. Rullesål med anti-slip tillader en komplet gangcyklus. Justerbare velcrobånd garanterer komplet immobilisering. Enkel og nem at montere. Muligt at tilføje kileindlæg.

Anvendelsesområde: Alle grader af ankelforstuvning. Bløddelsskader i læg, fod og/eller ankel. Distale stressfrakturer i tibia og fibula



Art. nr.	Model	Størrelse	Længde	Skostørrelse
47605	Walker Fixed Høj	Small	35 cm	34-38
47605	Walker Fixed Høj	Medium	42 cm	39-42
47605	Walker Fixed Høj	Large	42 cm	43-45
47605	Walker Fixed Høj	X-Large	42 cm	45-48
47613	Ekstra polstring	Small		
47613	Ekstra polstring	Medium		
47613	Ekstra polstring	Large		

Postoperativ sko

Behandlingssko med en polstret, slidstærk nylonoverdel med spænder med returløkke. Overdelen tilpasser sig til hævelser og bandager.

Polstret indersål med en helt rigid, letvægts- og slidstærk ydersål. Sålen er designet til forbedret stabilitet for at fremme rehabilitering efter fodkirurgi, traumer eller enhver tilstand, der kræver immobilisering for at fremme helingen. Kan også bruges i kombination med en gips.

Anvendelsesområde: Tilpasser sig bandager eller hævelse, fodkirurgi, fraktur af tå, metatarsal skader, bløddelsprocedurer, behandling af diabetisk fod, postoperativt.



Art.nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse	Længde indersål
43207	Pediatric	One size	Bilateral	EU < 35	20 cm
43208	Dame	Small	Bilateral	EU 35-37	23,5 cm
43208	Dame	Medium	Bilateral	EU 37-40	24,5 cm
43208	Dame	Large	Bilateral	EU 40-43	26 cm
43209	Herre	Small	Bilateral	EU 41-42	26 cm
43209	Herre	Medium	Bilateral	EU 43-45	27,5 cm
43209	Herre	Large	Bilateral	EU 46-47	30 cm
43209	Herre	X-Large	Bilateral	EU 47 >	31 cm



Optima Diab

Optima Diab er en knæhøje støvle der primært er beregnet til den diabetiske fod mhb forfoden og mellemfoden. Støvlen har en stabil høj hæl, der kan ændres med varmpistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, et sæt modulerbarer pussel indlægssåler medfølger "Optima indlæg 3x3 pr.sæt ", for målrettet aflastning af det plantare fodsår. Indlægssålerne giver en vægtaflastning ved hjælp af de 3-lag samt 3 fastheds niveauer (stiv, medium, blød). Velcro bånd samt et fikseringsbånd sikrer at produktet ikke kan fjernes. "Optima indlæg ved amputation" passer i Optima Diab og kan bestilles separat.

Anvendelsesområde: Diabetiske fodsår og fodsår i forfoden og mellemfoden, rehabilitering efter mindre amputationer (undtagelse - Chopart amputation), rehabilitering efter operation af foden, behandling af Charcot fod i overgangsfasen fra akut til kronisk.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79000	Optima Diab	Small	Bilat.	34 - 36
79000	Optima Diab	Medium	Bilat.	37 - 39
79000	Optima Diab	Large	Bilat.	40 - 42
79000	Optima Diab	X-Large	Bilat.	43 - 45
79000	Optima Diab	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	Medium	Bilat.	37 - 39
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	Large	Bilat.	40 - 42
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	X-Large	Bilat.	43 - 45
79005	Optima Indlæg 3x3 sæt	XX-Large	Bilat.	46 - 48

Optima Clheel

Optima Clheel er en knæhøje aflastende støvle der primært er beregnet til diabetiske fodsår og skader på hælen. Støvlen her åben i hælen med en høj stabil bagkappe, der kan ændres med varmpistol. Polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, et sæt modulerbarer pussel indlægssåler medfølger "OptimaClheel indlæg 3x3 pr.sæt ", for målrettet aflastning af det plantare fodsår. Indlægssålerne giver en vægtaflastning ved hjælp af de 3-lag samt 3 fastheds niveauer (stiv, medium, blød). Velcro bånd samt et fikseringsbånd sikrer at produktet ikke kan fjernes.

Anvendelsesområde: Diabetes- plantar sår eller skader på hælen, ledbåndsskader, tryksår.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79002	Optima Clheel	Small	Bilat.	34 - 36
79002	Optima Clheel	Medium	Bilat.	37 - 39
79002	Optima Clheel	Large	Bilat.	40 - 42
79002	Optima Clheel	X-Large	Bilat.	43 - 45
79002	Optima Clheel	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	Small	Bilat.	34 - 36
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	Medium	Bilat.	37 - 39
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	Large	Bilat.	40 - 42
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	X-Large	Bilat.	43 - 45
79006	Optima Clheel indlæg 3x3 sæt	XX-Large	Bilat.	46 - 48

Optima Postop

Optima Postop er en lav, aflastende støvle der primært er beregnet til behandling af iskemiske sår. Støvlen har en høj rigid bagkappe, der kan ændres med varmpistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, et plantar indlægssål i blød densitet og velcrobånd. Både "Optima indlæg 3x3 pr.sæt " og "Optima indlægssål ved amputation" passer i Optima Postop støvlen.

Anvendelsesområde: I behandling af iskemiske sår (før og efter revaskularisering), Metatarsalfrakturer, rehabilitering efter tåamputation, før stabiliseringsoperationer, tåfrakturer.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79001	Optima Postop	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79001	Optima Postop	Small	Bilat.	34 - 36
79001	Optima Postop	Medium	Bilat.	37 - 39
79001	Optima Postop	Large	Bilat.	40 - 42
79001	Optima Postop	X-Large	Bilat.	43 - 45



Optima Europa

Optima Europa er en sko beregnet til behandling af fodrehabilitering. Skoen har en rigid bagkappe, der kan ændres med varmepistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, en plantar indlægssål i blød densitet og velcrobånd. Både "Optima indlæg 3x3 pr.sæt" og "Optima indlægs ved amputation" passer i Optima Europa.

Anvendelsesområde: Behandling af sår mellem tæerne, rehabilitering efter hallux valgus operationer, rehabilitering efter hammertås operation, rehabilitering efter operation af Mortons neurom, rehabilitering efter fjernelse af negl.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79003	Optima Europa	Small	Bilat.	34 - 36
79003	Optima Europa	Medium	Bilat.	37 - 39
79003	Optima Europa	Large	Bilat.	40 - 42
79003	Optima Europa	X-Large	Bilat.	43 - 45
79003	Optima Europa	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Free

Optima Free er en støvle beregnet til behandling af fodrehabilitering. Støvlen har en rigid bagkappe, der kan ændres med varmepistol samt en polstring der er åndbar og kan vaskes. Rulle sål er af plast, en plantar indlægssål i blød densitet og velcrobånd. "Optima indlæg 3x3 pr.sæt" passer i Optima Free.

Anvendelsesområde: Dorsale skader af foden, rehabilitering efter hallux valgus operationer.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79004	Optima Free	Small	Bilat.	34 - 36
79004	Optima Free	Medium	Bilat.	37 - 39
79004	Optima Free	Large	Bilat.	40 - 42
79004	Optima Free	X-Large	Bilat.	43 - 45
79004	Optima Free	XX-Large	Bilat.	46 - 48

Optima indlæg 3x3 pr.sæt

Optima indlæg 3x3 pr.sæt er beregnet for målrettet aflastning af plantare fodsår. Indlægget har tre lag og 3 forskellige fastheder ; Regid, (Blå, 40Sh), Medium (Gul, 25 Sh) og Blød (Rød, 20 Sh) som kan kombineres og tilpasses til fodsår. Optima indlæg 3X3 pr.sæt indgår som standard i Optima Diab men passer også til Optima Postop, Europa og Free, kan også bestilles separat.

Øvrigt: OBS! Optima Indlæg 3x3 pr.sæt skal tilpasses udelukkende af medicinsk personale. Anvend aldrig indlæggene i en almindelig sko eller andre ortopædiske sko. Hele sættet skal altid anvendes med alle komponenter komplet sammen til hinanden inden i Optima støvlen. Anvende Optima brugervejledningen for tilpasningen.



Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	Medium	Bilat.	37-39
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	Large	Bilat.	40-42
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	X-Large	Bilat.	43-45
79005	Optima indlæg 3 x 3 sæt	XX-Large	Bilat.	46-48

Optima indlæg ved amputation

Optima indlæg ved amputation er en indersål af EVA-material lavet til at anvende i OptimaDiab, Postop og Europa efter transmetatarsal amputation.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79007	Optima indlæg ved amputation	Small	Bilat.	34-36
79007	Optima indlæg ved amputation	Medium	Bilat.	37-39
79007	Optima indlæg ved amputation	Large	Bilat.	40-42
79007	Optima indlæg ved amputation	X-Large	Bilat.	43-45
79007	Optima indlæg ved amputation	XX-Large	Bilat.	46-48





Mål: Stumpens længde

Body Armor Pro Term

En amputationsortose for midlertidig behandling efter Chopart eller Lisfranc amputationer. Et alternativ til den første lægningsperiode. Sålens form både på inder- og ydresiden holder hælen i dorsalekstension og derved sikre at belastningen ligger på hælen. Den stabile konstruktion holder stumpe god på plads og hjælper med til at bibeholde formen. Inderstrømpen har en indbygget pumpefunktion som hjælper med at holde formen igennem let kompression. Findes i to størrelser afhængig af stumpens længde. 16 respektiv 19 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hør
79008	Body Armor Pro Term	Medium	16 cm	Bilat.
79008	Body Armor Pro Term	Large	19 cm	Bilat.



SBI Motus Diabetes Walker

SBI Motus Diabetes Walker er beregnet til aflastning af diabetes fodsår på mellemfoden og fremfoden. Ortosen har en rstablet plastramme som beskytter tibia og en aftagelig polstring der kan ændres med varmepistol. Den aftagelige ydersål; Total rullensål er beregnet for behandling af plantarskader ved fodsår. Som tilbehør findes der også en aftagelig "Stabil rullensål" som hjælper til med at gå fra akut til kronisk behandling. Ortosen har et flytbar fikseringsbånd, som sikrer at Ortosen ikke kan tages af. Justerbare SBI indlæg 3x3 pr.sæt er indlægs såler forbeholdt for målrettet aflastning af plantare fodsår. Indlægget har 3 lag og 3 forskellige fastheder (rigid, medium og blød) som kan kombineres og tilpasses til fodsåret. SBI indlæg 3x3 pr.sæt indgår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.



Anvendelsesområde: Sårpleje og behandling af fremfod- og mellemfods fodsår ved diabetes. Som stabilisering for en Charcot fod. Ved rehabilitering efter operation.

Øvrigt: Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger produktet.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilat.	34 - 36
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilat.	37 - 39
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilat.	40 - 42
79015	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilat.	43 - 45
79015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilat.	46 - 48



SBI Frame Post-op Walker

Prefabrikerede og justerbar trauma- Walker. Med lav vægt og høj komfort, for funktionel rehabilitering. Stabil plast ramme som beskytter tibia og en inder strømpe som kan fjernes samt kan formes med en varmpistol. Flytbar placering af velcrostrop. Aftagelig Stabil Rulle og et enkelt SBI indlæg ingår.

Anvendelsesområde: Stabil fod- og ankelfraktur, svære ankel forstuvninger, post- operativ behandling.

Øvrigt: Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger produktet.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79016	SBI Frame Post-op Walker	Small	Bilat.	34-36
79016	SBI Frame Post-op Walker	Medium	Bilat.	37-39
79016	SBI Frame Post-op Walker	Large	Bilat.	40-42
79016	SBI Frame Post-op Walker	X-Large	Bilat.	43-45
79016	SBI Frame Post-op Walker	XX-Large	Bilat.	46-48

SBI Wheel Walker

SBI Wheel Walker er udviklet for funktionel rehabilitering og hælaflastning ved behandling af sår på hælen. Ortosen har lav vægt og høj komfort, er åben i hælen for aflastning af sår. Den åbne hæl bidrager også med lufttilgang af sår samt såret kan tilses ved behov. Ortosen er justerbar med en plastramme som beskytter tibia og en aftagelig polstring der kan ændres med varmepistol. Aftagelige Total rullerul er beregnet for behandling af plantarskader ved fodsår samt justerbare indlægssåler 3x3 pr.sæt som indgår i produktet. Ortosen har flytbare velcrostrapper.

Anvendelsesområde: Behandling af sår på hælen.



Øvrigt: Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger produktet.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	Small	Bilat.	34-36
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	Medium	Bilat.	37-39
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	Large	Bilat.	40-42
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	X-Large	Bilat.	43-45
79017	SBI Wheel Walker åben hæl	XX-Large	Bilat.	46-48



SBI beskyttelsesbetræk

SBI beskyttelsesbetræk er vandafvisende og holder SBI Walkeren ren. Den er designet til SBI Motus, SBI Frame og SBI Wheel. Materialet er semi-elastiskt med en lynlås bagpå. En gummisål der giver bedre stabilitet under gang. Beskyttelsesbetrækket kan vaskes.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	Small	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	Medium	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	Large	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	X-Large	Bilateral
79029	SBI Beskyttelsesbetræk	XX-Large	Bilateral



SBI Walker- ramme med lukket hæl

Udskiftningsbar ramme med lukket hæl til SBI Motus Diabetes Walker og SBI Frame Post- op Walker.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	Small	Bilat.	34 - 36
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	Medium	Bilat.	37 - 39
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	Large	Bilat.	40 - 42
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	X-Large	Bilat.	43 - 45
79018	SBI Walker-ram lukket hæl	XX-Large	Bilat.	46 - 48

SBI Walker- ramme åben hæl

Udskiftningsbar ramme med åben hæl til SBI Wheel Walker med åben hæl.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø	Skostørrelse
79019	SBI Walker-ram åben hæl	Small	Bilat.	34 - 36
79019	SBI Walker-ram åben hæl	Medium	Bilat.	37 - 39
79019	SBI Walker-ram åben hæl	Large	Bilat.	40 - 42
79019	SBI Walker-ram åben hæl	X-Large	Bilat.	43 - 45
79019	SBI Walker-ram åben hæl	XX-Large	Bilat.	46 - 48



SBI komplet inderdel til SBI Walker

Flytbar komplet inderdel til SBI Walker i Multidensity blød EVA som kan formes. Inderdelen er formet efter fodens og benets anatomi. Tibiabeteskyttelsen har en aftagelig extra skinnebensforstærkning.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	Small	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	Medium	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	Large	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	X-Large	Bilat.
79020	SBI komplett inderdel til SBI Walkers	XX-Large	Bilat.





SBI spænde og bånd til Walker

Flytbar komplet sæt til SBI ortosen med 8 spænder og 4 bånd.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
79021	SBI Spænder og Bånd til Walker	Small/Medium	8 spænder, 4 bånd
79021	SBI Spænder og Bånd til Walker	Large/X-Large/XX-Large	8 spænder, 4 bånd




SBI stabil rullerullesål

Sålerne på SBI ortosen kan hurtigt og enkelt sættes på, løsnes og fjerne fra hovedproduktet. En Stabil Rullerullesål har mindre afrulning end den Totale Rullerullesål og anvendes når behandlingen overgår fra akut fasen til den kroniske fase. Den Stabile Rullerullesål indgår ikke med produktet, men kan købes separat.

Øvrigt: OBS! Anvend aldrig SBI ortosen uden sål. Læs omhyggeligt brugervejledningen angående udbytning af såler.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
79022	SBI Stabil Rullerullesål	Grå	Small	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullerullesål	Grå	Medium	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullerullesål	Grå	Large	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullerullesål	Grå	X-Large	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullerullesål	Grå	XX-Large	Bilat.

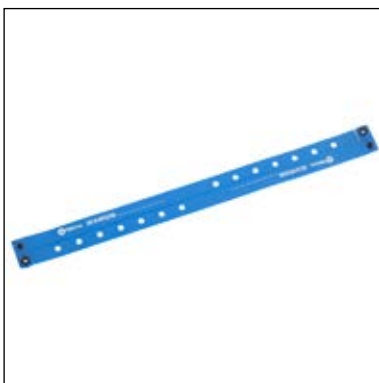

SBI fikseringsbånd til Walkers

Fikseringsbåndet er beregnet som sikring for at Ortosen ikke kan tages af.

Art. nr.	Model	Størrelse	Pakke
79028	SBI Låsbånd til Walker	One Size	2 stk.

SBI total rullesål

Sålerne på SBI ortosen kan hurtigt og enkelt sættes på, løsnes og fjernes fra hovedproduktet. SBI Total Rullesål indgår i SBI ortosen ved leveringen. Den er beregnet til at anvende under den akutte fase ved behandling af plantare fodsår. Den har mere afrulning end SBI Stabil Rullesål.

Øvrigt: OBS! Anvend aldrig SBI ortosen uden sål. Læs omhyggeligt i SBI brugervejledningen angående udbytning af såler.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
79023	SBI Total Rullesål	Sort	Small	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	Medium	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	Large	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	X-Large	Bilat.
79023	SBI Total Rullesål	Sort	XX-Large	Bilat.



SBI indlæg 3x3 pr.sæt

Modulsystemet SBI indlæg 3x3 pr. sæt er beregnet for målrettet at fordele trykket på fodsålen og håndterer sår på fremfod, mellemfod og hæl. Sættet består af ni dele som er koblet til hinanden som puslespils system som danner 3 forskellige plantarsåler. De tre har tre forskellige fastheder; Regid, (Blå, 40Sh), Medium (Gul, 25 Sh) og Blød (Rød, 20 Sh) som kan kombineres vertikalt og horisontalt. Trykket på fodsålen kan enkelt omfordes ved at man kombinerer de forskellige dele. Indlæggene er beregnet til at anvende i SBI Motus (medfølger), SBI Wheel (indgår), SBI Frame (tilvalg)

Øvrigt: OBS! SBI Indlæg 3x3 pr.sæt skal tilpasses udelukkende af medicinsk personale. Anvend aldrig indlæggene i en almindelig sko eller andre ortopædiske sko. Hele sættet skal altid anvendes med alle komponenter komplet sammen til hinanden inden i SBI ortosen. Anvend SBI brugervejledningen for tilpasningen.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	Small	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	Medium	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	Large	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	X-Large	Bilat.
79024	SBI Indlæg 3x3 Sæt	XX-Large	Bilat.





SBI indlæg ved amputation

SBI Indlæg ved amputation er beregnet for anvendelse af postoperativt efter amputation af tå eller ved transmetatarsal amputation. Indlægget er beregnet til at anvende i en SBI Motus (tilvalg), SBI Wheel (tilvalg), SBI Frame (tilvalg).

Øvrigt: SBI Indlæg ved amputation kan kun ordineres af medicinsk personale. Anvend aldrig indlægget i almindelige sko eller i andre ortopædiske sko. Anvend SBI Brugervejledningen for tilpasning.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79025	SBI Indlæg ved amputation	Small	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	Medium	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	Large	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	X-Large	Bilat.
79025	SBI Indlæg ved amputation	XX-Large	Bilat.



SBI indlæg enkel

En kraftig single indlægssål som indgår i SBI Frame Post- op Walker Art.nr. 79016, kan også købes separat.

Art. nr.	Model	Størrelse	Ve/Hø
79026	SBI Indlæg enkel	Small	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	Medium	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	Large	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	X-Large	Bilat.
79026	SBI Indlæg enkel	XX-Large	Bilat.



SBI tube strømpe uden søm

Der skal altid anvendes en tube strømpe uden søm under SBI ortosen. Tube strømpe, med en inderside af blød frotté, medfølger alle SBI produkterne ved levering.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
79027	SBI Tube strømpe uden søm	Blå	One Size	Bilat.