



Hånd- og håndledsortoser



SELECTION® Fingerloop

En tvillingbandage der effektivt holder to eller flere fingre sammen, så den stærkere finger kan hjælpe den svagere som støtte, beskyttelse og/eller for at øge bevægelsesomfanget. Kan også anvendes som en statisk progressiv skinne til øget bevægelighed i DIP-leddet.

Bandagen er fremstillet i 100 % slidstærkt og hurtigtørrende nylon. Svejset uden sømme og derfor let at klippe for en personlig pasform. Et eller flere bånd kan bruges samtidig. Det halvforberedte Fingerloop ark, som er 10 cm bredt, kan nemt klippes til individuelle bandager i ønsket bredde med en saks.

Anvendelsesområde: Støtte til fingrene efter f.eks. skader, kirurgi, stabile frakturer, metakarpal frakturer, kroniske smertetilstande, forstuvninger, slidgigt og kontrakturer.

Art. nr.	Model	Størrelse	Bredde	Længde	Antal/pakke
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15.5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark		10 cm	15,5 cm	1



Mallet fingerskinne

Immobiliserer DIP-leddet i ekstension og giver samtidig fuld bevægelighed i PIP-leddet. Anvendes normalt uden polstring og fikseres mod miderste falang med selvhæftende bånd (medfølger ikke).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Pakke	Omkreds
51422	Beige	1 - Small	10 stk.	4.5 - 5.0 cm
51422	Beige	2 - Small/Medium	10 stk.	5.0 - 5.5 cm
51422	Beige	3 - Medium	10 stk.	6.0 - 6.5 cm
51422	Beige	4 - Medium/Large	10 stk.	6.5 - 7.0 cm
51422	Beige	5 - Large	10 stk.	7.0 - 7.5 cm
51422	Beige	5.5 - Large+	10 stk.	7.5 - 8.0 cm
51422	Beige	6 - Large/X-Large	10 stk.	8.0 - 8.5 cm
51422	Beige	7 - X-Large	10 stk.	8.5 - 9.0 cm



Mål: Omkreds PIP-led

SOF-Stretch dynamisk fingerortose kort

Skinne der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket. Bilateral wire kan bøjes for at tilpasse modstanden og gøre plads til eventuelt ødem. Det korte design tillader fuld bevægelighed i MCP-leddene.

Anvendelsesområde: Fleksionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
51405	Hvid	X-Small	3,8 cm
51405	Hvid	Small	4,4 cm
51405	Hvid	Medium	5,1 cm
51405	Hvid	Large	5,7 cm
51405	Hvid	X-Large	7 cm



Mål: Volart mellem MCP-leddet och DIP-leddet.



Mål: Volart mellem distale palmarled og DIP-leddet

SOF-Stretch dynamisk spiralortose

Ekstensionsskinne (Capener) der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Spiralfjedrene er placeret på begge sider af PIP-leddet for at yde samme modstand i alle positioner. De kan løsnes eller strammes til ønsket modstand. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket.

Anvendelsesområde: Fleksionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet. Egnede til kontrakturer op til 45°.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
51410	Hvid	Small	6,4 cm
51410	Hvid	Medium	7 cm
51410	Hvid	Large	7,6 cm
51410	Hvid	X-Large	8,3 cm



Mål: Volart mellem distale palmarled og DIP-leddet

SOF-Stretch dynamisk fingerortose

Skinne der yder dynamisk assistance for at øge ekstensionen i PIP-leddet ved kontrakturer og stramhed. Anatomisk formede puder fordeler og aflaster trykket. Bilateral wire kan bøjes for at tilpasse modstanden og gøre plads til eventuelt ødem.

Anvendelsesområde: Fleksionskontrakturer og stramhed i PIP-leddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
51400	Hvid	X-Small	5,1 cm
51400	Hvid	Small	6,4 cm
51400	Hvid	Medium	7,6 cm
51400	Hvid	Large	8,9 cm
51400	Hvid	X-Large	10,2 cm
51401	Sort	X-Small	5,1 cm
51401	Sort	Small	6,4 cm
51401	Sort	Medium	7,6 cm
51401	Sort	Large	8,9 cm
51401	Sort	X-Large	10,2 cm

Vission fingerskinne

Fingerskinne til immobilisering af finger efter skade eller operation for at forhindre kontrakturer i fingerleddene. Kan også bruges ved konservativ fingerterapi og ved Dupuytren syndrom samt tilstande som kræver midlertidig immobilisering af fingrene.

Anvendelsesområde: Immobilisering af finger efter skade eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom og tilstande som kræver midlertidig immobilisering af fingrene.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 27 cm.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46020	Vission Fingerskinne	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskinne	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskinne	Large	> 19 cm	Bilat.



Mål: Omkreds håndled.

Vission multifinger ortose

Denne ortose er til immobilisering af fingrene efter skade eller operation for at forhindre kontrakturer i fingerleddene. Kan også bruges til konservativ fingerterapi samt behandling af Dupuytren syndrom. Tilstande der kræver midlertidig immobilisering af fingrene. Ortosen kan også bruges i forbindelse med behandling ved frakturer af metacarpalknogle III-V og dens tilknyttede falanger.

Anvendelsesområde: Immobilisering, Dupuytren syndrom, ved frakturer.

Kontraindikationer: Ingen kendte

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 30 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Sort	Small	< 16 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Sort	Medium	16 - 19 cm	Ve/Hø
46021	Vission Multifinger	Sort	Large	> 19 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled.



Mål: Omkreds fingerled.

Oval-8® fingerskinne

Oval-8® fingerskinner er designet til at støtte, stabilisere eller immobilisere de små led i en patients finger. Det alsidige 3-punkts design gør det muligt at behandle 6 eller flere tilstande med en enkelt drejning af fingerskinnen. Oval-8® fingerskinner er fremstillet i støbt plast og har afrundede kanter for øget komfort. De er vandtætte og kan bæres ved bad og i fugtige omgivelser. Fås i 14 størrelser.

Anvendelsesområde: Oval-8® Fingerskinne er designet til med 3-punktskontrol at holde et fingerled lige, forhindre eller begrænse bevægelsen af hensyn til beskyttelse og for at muliggøre heling. Enheden kan bruges til at håndtere flere forskellige fingertilstande, afhængigt af hvor og hvordan den bæres på fingeren.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Antal/pakke
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	2	4,30 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	3	4,50 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	4	4,95 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	5	5,27 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	6	5,70 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	7	5,86 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	8	6,14 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	9	6,35 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	10	6,82 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	11	7,09 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	12	7,40 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	13	7,65 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	14	8,09 cm	5
51423	Oval-8® Fingerskinne	Beige	15	8,20 cm	5
51428	Oval-8® størrelsessæt		2-15		1 per størrelse
51429	Oval-8® sæt		2-15		44



Mål: Omkreds Håndled

Vission NEO tommelortose kort

Blød, elastisk tommelortose i neopren som beskytter og aflaster tommelen samt giver varme. Findes i to længder. Ved hvile holdes tommelfingeren i neutralleje uden belastning af muskler og sener. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelen og håndled.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialsiden er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46025	Kort	Sort	Small	13 - 16 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Sort	Medium	15 - 18 cm	Ve/Hø
46025	Kort	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø

Vission NEO tommelortose lang

Blød, elastisk tommelortose i neopren som beskytter og aflaster tommelen samt giver varme. Findes i to længder. Denne model, som er længere, giver en let støtte til håndleddet. Ved hvile holdes tommelfingeren i neutralleje uden belastning af muskler og sener. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelen og håndled

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 12,5 cm. Ortosen er fremstillet i Nylon og SBR (Latexfri neopren).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
46026	Lang	Sort	One Size	Ve/Hø



Mål: Omkreds Håndled

Vission tommelortose kort med skinne

En tommelortose med plastskinne som giver støtte til tommelen og omkringliggende strukturer. Opbygningen af det underliggende materiale gør, at skinnen ikke trykker mod led eller muskulatur. Materialet er et stabilt og slidstærkt elastisk materiale, som har en blød og behagelig inderside. Åbent justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Instabilitet i tommelens led (CMC -eller MCP-leddet), inflammationer, slidskader, belastningsrelaterede problemer samt ved reumatiske forandringer

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 13 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46028	Med skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds Håndled



Mål: Omkreds håndled

Vission tommelortose lang med skinne

En smidig, elastisk tommelortose i lang model. Ortosen har en udtagbar metalskinne som giver støtte til tommelen og omkringliggende strukturer samt en let støtte til håndledet. Ortosen er beregnet til at begrænse bevægelse i CMC og MCP 1 leddet samt positionere tommelen i en funktionel position. Den er fremstillet i et stabilt og slidstærkt materiale med en blød og behagelig inderside. Åbent justerbart tommelgreb. Den todelte lukning gør, at ortosen er let at åbne og lukke med en hånd.

Anvendelsesområde: Osteoartrose og/eller instabilitet i CMC og MCP 1, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 16 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46023	Lang med skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® tommelortose Soft

Smidig og elastisk tommelortose der aflaster tommelens led og giver en let støtte. SELECTION® tommelortose Soft er fremstillet i et smidigt, moderne og let materiale, der er åndbart og føles behageligt mod huden. Ved hvile holdes tommelen i neutralløje uden at belaste muskler og senefæste. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelens led, mild CMC-1 artrose.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35200	Soft	Sort	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø

SELECTION® tommelortose Rigid

Smidig og elastisk tommelortose med ekstra stabilitet omkring tommelen. Giver aflastning til tommelens led og en stabil støtte. Giver desuden støtte og beskyttelse til tommelens MCP-led. SELECTION® tommelortose rigid er fremstillet i et smidigt, moderne og let materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. Ved hvile holdes tommelen i neutralleje uden af belaste muskler og senefæste. Kan klippes til ønsket form.

Anvendelsesområde: Reumatologiske sygdomme, aflastning, hypermobilitet i tommelens led, mild til moderat CMC-1 artrose.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse M).

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	Medium	15-17cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35202	Rigid	Sort	X-Large	>20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Ve/Hø
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Håndledsflade mål

SELECTION® tommelortose børn

Blød og behagelig tommelortose til børn. SELECTION® materialet er tyndt, smidigt og tillader huden at ånde. Ortosen er tænkt til at guide hånd og håndled til en funktionel position i forhold til at lindre smerte ved inflammation og reumatiske tilstande. Ortosen kan også anvendes til at reducere spasticitet ved neurologiske tilstande i hånd og håndled. Tommelgrebet er justerbart og kanterne kan trimmes ved behov.

Anvendelsesområde: Positionering af hånden efter Brachial Plexus Neuropatier (BPN), spastisk hånd ved Cerebral Parese. Arthrogryposis. Reumatiske sygdomme.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 9 cm (størrelse M).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35300	Sort	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Ve/Hø
35300	Sort	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Ve/Hø
35300	Sort	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Ve/Hø
35300	Sort	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø
35300	Sort	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Ve/Hø



Mål 1: 2-5 MCP

Mål 2: Håndens længde fra håndled til fingerspids

SOT tommelortose

SOT tommelortose er en anatomisk formet hvileortose til tommel og håndflade. Ortosen positionerer tommelfingeren i en optimal hvileposition. Den er udformet til at begrænse bevægelserne i tommelens CMC -og MCP-led, give støtte til håndfladen samt positionere tommelens led og muskler i en behagelig hvileposition. SOT har en kerne af aluminium, som gør, at ortosen kan tilpasses og formes til individuel pasform. Ortosen kan justeres såfremt kontraktoren forandres. Det smidige design gør den til et godt alternativ til specialfremstillede hvileortoser. Læs mere om tilpasning og justeringer i brochuren Tips & Tricks.

I tilfælde hvor der behøves ekstra støtte til håndledet kan SOT Tommelortose bruges sammen med en håndledsorthose. Vission Håndledsorthose 46029 og Selection Open Wrist 35207 er optimale ortoser i forhold til at kombinere med SOT Tommelortose.

Anvendelsesområde: SOT Tommelortose er beregnet til brug ved slidigt, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tommelen og ved overbelastningsskader.

Øvrigt: SOT Tommelortose kan vaskes i 40 grader.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28720	SOT Tommelortose	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28721	Ekstra betræk	Small			Ve/Hø
28721	Ekstra betræk	Medium			Ve/Hø
28721	Ekstra betræk	Large			Ve/Hø

Basic tommelortose, kort og lang

Ortose med plastskinne der giver støtte til tommelfingeren og omkringliggende strukturer. Materialet er klippet på skrå i forhold til optimal pasform og elasticitet. Åben justerbar tommelstrop. Den lange model er 2 cm længere og giver støtte til håndledet. Kan kombineres med håndledsbånd 27447 eller 27448 for ekstra stabilitet.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Basic tommelortose kort - ortosens længde på radialsiden er 12,5 cm
Basic tommelortose lang - ortosens længde på radialsiden er 15 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27443	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27444	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Tee Pee™ tommelortose

Tommelortose med tre formbare aluminumsskinner, centralt, dorsalt og palmart. Ortosen giver en stabil støtte til tommelfingeren. Fremstillet af perforeret luftig ruskindsimulation med åndbart foer.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme og instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28560	Sort	X-Small	<9 cm	Bilat.
28560	Sort	Small	9-10 cm	Bilat
28560	Sort	Medium	10-11,5 cm	Bilat.
28560	Sort	Large	11,5-13 cm	Bilat.
28560	Sort	X-Large	>13 cm	Bilat.



Mål: Længde fra håndled til tommelens IP-led



Mål: Omkreds håndled

CMC-X Lacer tommelortose

CMC-X Lacer™ tommelortose giver smertelindring ved osteoartrit i tommelens CMC-led samtidig med at den tillader bevægelse.

Lukkesystemet med snøre kan let justeres og placere tommelbasen i ønsket abduktionsgrad for at hjælpe til med at stabilisere CMC-leddet og tillade tommelfingeren en funktionel mobilitet. Den justerbare polstrede aluminiumsskinne fungerer sammen med snøresystemet og giver et let tryk med yderligere stabilisering af CMC-leddet. CMC-X Lacer tommelortose er fremstillet af hypoallergen CoolFlex™ materiale for komfort og kompression. CMC-X Lacer indeholder ikke latex eller neopren.

Anvendelsesområde: Osteoartrit i tommelens CMC-led, medial subluxation af tommelens CMC led.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28562	Sort	X-Small	<14 cm	Bilat.
28562	Sort	Small	14-16 cm	Bilat.
28562	Sort	Medium	16-18 cm	Bilat.
28562	Sort	Large	18-19,5 cm	Bilat.
28562	Sort	X-Large	>19,5 cm	Bilat.



Mål: Omkreds håndled

CMC tommelortose

Denne tommelortose er beregnet til at give støtte til CMC-leddet ved instabilitet og slidskader. Den polstrede indre skinne i kombination med det ydre elastiske bånd giver kompression af tommelbasen og hjælper dermed til at stabilisere CMC-leddet.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme og instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28561	Sort	X-Small	<14 cm	Ve/Hø
28561	Sort	Small	14-15,5 cm	Ve/Hø
28561	Sort	Medium	15,5-17,5 cm	Ve/Hø
28561	Sort	Large	17,5-19,5 cm	Ve/Hø
28561	Sort	X-Large	>19,5 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds MCP-leddet

CMCcare tommelortose

Tommelortose som støtter tommelens CMC-led og holder metakarpalleddet i en funktionel position og bibeholder gribefunktionen. Ortosen har en integreret formbar aluminium-skinne og et justerbar velcrolukning. Det anatomiske design med sin affasede kanter giver en perfekt pasform og bedste komfort. Håndleddet og øvrige dele af hånden kan bevæge sig frit uden at blive hindret af ortosen.

Anvendelsesområde: Osteoartrit i tommelens led, instabilitet i tommelen, postoperativt efter artroplastik i CMC-I leddet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28552	Grå	Small	16 - 19,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Medium	19,5 - 22,5 cm	Ve/Hø
28552	Grå	Large	22,5 - 26 cm	Ve/Hø

Tommelortose Rigid Airmed

Tommelbasortose er beregnet til posttraumatisk immobilisering af tommelens MCP-led. Ortosen giver støtte og aflaster trapezio-metakarpalleddet. Hjælper patienten til at begrænse bevægelser, som kan årsage skade eller smerte. Ortosen har indsyet metalskinner, som kan formes efter behov. Ortosen er blød og behagelig at have på og forsynet med et ventilationshul.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk immobilisering af tommel MCP-led, karpaltunnelsyndrom og tendinit.

Øvrigt: Ortosens længde på tommelens radialside er 11 cm (størrelse S).

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilat
28551	Grå	Small	14 - 18 cm	Bilat
28551	Grå	Large	18 - 22 cm	Bilat



Mål: Omkreds håndled.

Sporlastic tommelortose

Stabil tommelortose fremstillet af plast til immobilisering af tommelfingeren i funktionsstilling. Påsyet velcrobånd giver justerbar lukning. Stockinette i high-tech fiber opsuger fugt og giver en blød polstringseffekt.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt og ved instabilitet.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28545	Beige	Small	<17 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Ve/Hø
28545	Beige	Large	>19 cm	Ve/Hø
28547	Ekstra Inderhandske	Small		Bilat.
28547	Ekstra Inderhandske	Medium		Bilat.
28547	Ekstra Inderhandske	Large		Bilat.



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® Ulnar Deviationsortose


SELECTION® Ulnar Deviationsortose er beregnet til at forbedre fingrenes position for at give en bedre håndfunktion og opnå et mere funktionelt greb.

Ortosen lindrer strukturerne på samme tid som den har en smertestillende effekt. Den understøtter MCP- og PIP-leddene, samtidig med at den forbedrer fingernes trækretning.

Ortosen er designet så materialet går langt ud på ulnarsiden over 5. MCP for at støtte bedst muligt, modvirke trækretningen og fordele trykket. Hook hæfter overalt på ortosen, så der er ingen begrænsninger for placering af stropperne for at opnå den optimale trækretning. Eftersom ortosen er så tynd og fin i kvaliteten kan den enkelt kombineres med en håndledsbandage, hvis der er behov for yderligere støtte. Specialdesignede forstærkninger af Lav temperaturplast (non-coated) hæfter direkte på ortosen.

Anvendelsesområde: Til patienter med gigt. Ulnar deviation kan forekomme ved inflammatoriske og degenerative sygdomme, såsom RA. SELECTION® Ulnar deviationsortose kan også bruges til hypermobile led og til svage muskler med det formål at ydemere støtte. Skal ikke anvendes i forbindelse med fikserede kontrakturer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35218	Sort	X-Small	13-16 cm	Ve/Hø
35218	Sort	Small	16-19 cm	Ve/Hø
35218	Sort	Medium	19-22 cm	Ve/Hø
35218	Sort	Large	22-25 cm	Ve/Hø

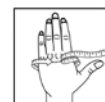

Mål: Omkreds MCP 2-5



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® håndled kort

Smidig, elastisk håndledsortose uden skinne, lavet i et moderne og behageligt material som er åndbart og føles behageligt mod huden. Ortosen, som er kortere end Selection Håndledsortose Soft og Rigid, giver støtte til håndleddet uden at hindre bevægeligheden, men giver en let kompression. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgreb.

Gennem materialets konstruktion er det muligt at justere formen lidt med saks i forhold til optimal pasform. Separat ekstra bånd kan bestilles.

Anvendelsesområde: Støtter og aflaster håndleddet efter skade, operation, ved kronisk smerte, slidtage i led eller overbelastning. Efter ganglion-operationer, ved behov af kompression. Hypermobile led ved Ehlers Danlos Syndrom. Ortosen kan også anvendes forebyggende ved tunge eller monotone bevægeligheder.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35222	Kort uden skinne	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35223	Kort uden skinne	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndledsortose Soft

Smidig, elastisk håndledsortose fremstillet af et moderne smidigt materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. SELECTION® Soft har en formet plasticskinne på volarsiden og en blødere lige plasticskinne på dorsalsiden. Skinnerne er udtagelige. Den todelte lukning gør ortosen let at åbne og lukke med én hånd. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks i forhold til en optimal pasform.

Anvendelsesområde: Når håndleddet har brug for aflastning fx. ved inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm. Plus-størrelserne har ekstra bredde i underarmsdelen.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35204	Soft	Sort	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Ve/Hø
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Underarmsmål



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen er en medium-stabil håndledsortose med dobbelt lukkefunktion. Den kan åbnes helt og derefter løst lukkes med velcro og strammes til med snører. Brugeren kan selv vælge, om den skal åbnes helt hver gang ortosen skal tages på/af eller om det blot er snørefunktionen, der skal anvendes. Den har et lavt snit i håndfladen for at følge håndens naturlige bøjefurer og udskæringen rundt om tommelen tillader thenarmusklen at arbejde frit. Den todele snørelukning i kombination med velcrolukningen muliggør tilpasning ved en bredere underarm. Eftersom snøren kommer fra ulnarsidan mindskes risikoen for, at tommelen positioneres fejlagtigt. Regulerbart tommelbånd fra volarsiden. I kraft af materialets konstruktion er det muligt at justere formen med saks i forhold til optimal pasform.

Fremstillet i det luftige og behagelige SELECTION®-materialet med alle de funktioner, som dette indebærer. Ortosen er 22 cm lang, dvs 4 cm længere end en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumskinne på volarsidan som er udtagelig.

Anvendelsesområde: Efter ophelet radiusfraktur, bløddelsskader, inflammationer, overbelastningsskader, arbejdsrelateret overanstrengelse samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Kontraindikationer: Må ikke anvendes ved ikke-helet fraktur.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	X-Small	<11 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35209	Multiopen	Sort	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø



Mål: Længde på leddets midte
MCP1 – leddets på midte IP1.

SELECTION® Radialis tommedel

Tekstil tommedel, som kombineres med SELECTION® Håndledsortoser 35204, 35205 og 35209. Tommeldelen kan med fordel kombineres med SELECTION® Radialis Fingerdel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til anvendelse ved Radialisparese (drophånd, som er forårsaget af skade på radialisnerven) for at muliggøre en funktionel gribeevne, mens nerven opheler.

Anvendelsesområde: Radialisparese

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Sort	Small	3 - 4 cm	Ve/Hø
35216	Radialis Tommeldel	Sort	Large	5 - 6 cm	Ve/Hø

SELECTION® Radialis fingerdel

Tekstil Fingerdel, som kombineres med SELECTION® Håndledsortoser 35204, 35205 og 35209. Fingerdelen kan med fordel kombineres med SELECTION® Radialis Tommeldel. Både SELECTION® Radialis Tommeldel og Fingerdel er beregnet til anvendelse ved Radialisparese (drophånd, som er forårsaget af skade på radialisnerven) for at muliggøre en funktionel gribeevne, mens nerven opheler.

Anvendelsesområde: Radialisparese.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Sort	Small	17 - 20 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Sort	Medium	20 - 23 cm	Ve/Hø
35217	Radialis Fingerdel	Sort	Large	23 - 27 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds MCP 2-5

SELECTION® Open Wrist

En stabil og enkel håndledsortose i det behagelige SELECTION® materiale. Ortosen har en formet plasticskinne på volarsiden og en smal plasticskinne dorsalt. Ortosen har et stabiliserende rundgående håndledsbånd og tages enkelt på med en hånd. SELECTION® Open Wrist kan anvendes, når håndleddet trænger til aflastning.

Anvendelsesområde: Inflammation, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35207	Sort	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35207	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35207	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35207	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35207	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® Bromsa håndled

Selection bromsa håndled er beregnet til at begrænse bevægelsen i håndleddet i forhold til at aflaste håndextensorerne, støtte håndleddet og reducere smerte ved bl. a. tennis albue. Ortosen har bløde plastskinner på håndryggen, justerbar strop til tommelfingeren og SELECTION snøresystem. Støtten kan tilpasses ved at bruge en eller to plastskinner. Snøresystemet giver ortosen en bedre lukning omkring hånden og en bedre pasform.

Anvendelsesområde: Lateral epicondylit, hypermobilitet, reumatiske sygdomme, uspecificeret smerte.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	X-Small	<11 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	Small	11-14 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35208	Selection Bromsa	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

SELECTION® håndledsortose Rigid

Smidig, elastisk håndledsortose med tommedel, fremstillet i et moderne smidigt, let materiale der er åndbart og føles behageligt mod huden. Tommeldelen giver ved sit mere stabile materiale en god støtte og holder tommelen i neutralleje. SELECTION® Rigid har en formet plastskinne på volarsiden og en blødere lige plastskinne på dorsalsiden. Skinnerne er udtagelige. Den todelte lukning gør ortosen let at åbne og lukke med én hånd. Justerbart tommelgreb. Materialets konstruktion gør det muligt at justere formen med en saks i forhold til en optimal pasform.

Anvendelsesområde: Når håndleddet og tommelen har brug for aflastning fx. ved inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	X-Small	< 11 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	Small	11 - 14 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	Medium	14 - 17 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	Large	17 - 20 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	X-Large	20 - 23 cm	Ve/Hø
35206	Rigid	Sort	XX-Large	23 - 26 cm	Ve/Hø

SELECTION® håndled børn

Blød og behagelig håndledsortose til børn. Denne stabile ortose har en udtagbar aluminiumskinne på volarsiden og to bånd til enkel lukning. Skinnen er udtagelig. SELECTION® materialet er tyndt, smidigt og tillader huden at ånde. Tommelbåndene er justerbare og kanterne er bløde. Farvedetaljerne er valgt for at tiltale børn.

Anvendelsesområde: Reumatiske problemer. Neurologiske skader hvor håndleddet trænger støtte og/ eller korrigerende. Efter afsluttet gipsbehandling. Betændelser.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35305	Sort	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Ve/Hø
35305	Sort	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Ve/Hø
35305	Sort	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35305	Sort	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Ve/Hø
35305	Sort	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Håndflade mål

Mål 3: Ortosens længde på volarsiden

SELECTION® Open Wrist børn

En stabil og enkel håndledsortose i det behagelige SELECTION® materiale. Ortosen har en formet aluminiumskinne på volarsiden. Den har to tommelbånd, et som fæster rundt om tommelen og et som fæster på håndryggen for at holde tommelen på plads, så den ikke falder ind i hånden. Selection Open Wrist Barn er beregnet til immobilisering af CMC-leddet ved smerte, vejlede håndleddet til en neutral position samt ved behov for at støtte til håndleddet efter traume/operation.

Anvendelsesområde: Reumatoid artrit, CP, efter traume/operation.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Mål 3	Ve/Hø
35306	Barn	Sort	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Sort	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Ve/Hø
35306	Barn	Sort	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkreds håndled

Mål 2: Håndflade mål

Mål 3: Ortosens længde på volarsiden



Mål: Omkreds Håndled

Vission håndledsortose kort

En kortere håndledsortose, fremstillet i et stabilt og slidstærkt elastisk materiale med en blød og behagelig inderside. Modellen er helt åben og enkel at tage på og af. Ortosen har en god anatomisk pasform i håndfladen, over håndryggen og rundt om tommelens muskulatur. Denne model er uden skinne volart. Åben justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Støtter og aflaster håndleddet efter skade, operation, afgipsning, hypermobilitet, reumatiske problemer, ved kronisk smertetilstand, slidskader eller overbelastningsbesvær. Kan også anvendes forebyggende ved tunge og monotone bevægeligheder.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 13 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46030	Kort uden skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled.

Vission håndledsortose med skinne

En håndledsortose i standardmodel fremstillet i et stabilt og slidstærkt elastisk materiale med en blød og behagelig inderside. Modellen er helt åben og enkel at tage på og af. Ortosen har en god anatomisk pasform inde i hånden, over håndryggen og omkring tommelens muskulatur. Den giver en stabilt støtte og har en formbar plastskinne volart. Åbent justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Inflammationer, arbejdsrelaterede overanstrengelser samt ved reumatiske eller degenerative forandringer.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46029	Med skinne	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø

Vission håndledsortose med tommeldel

Smidig, elastisk håndledsortose med tommeldel lavet i et stabilt og slidstærk materiale med en blød og behagelige inderside. Ortosen er beregnet til at begrænse bevægelsen i CMC og MCP 1 leddet og til at positionere tommelen i en funktionel position samt begrænse fleksion i håndleddet. Ortosen har en formet plasticskinne på volarsiden. Tommeldelen har et ekstra bånd, som yderligere kan justeres i tommelgrebet.

Anvendelsesområde: Let til moderat instabilitet i CMC og MCP 1, ligamentskader, betændelse, degenerative sygdomme, traume.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18,5 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
46031	Med tommel	Sort	XX-Small	11 - 12 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Sort	X-Small	12 - 13 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Sort	Small	13 - 14 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Sort	Medium	14 - 16 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Sort	Large	16 - 19 cm	Ve/Hø
46031	Med tommel	Sort	X-Large	19 - 22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Basic håndledsortose, kort og lang

Enkel håndledsortose i kort og lang model med velcrolukning der giver god støtte og kompression. Åbne modeller der er lette at tage på og af. Udtagelig formbar aluminiumsskinne volart. Standardmodel med velcro påsyet og astrakan som lukkestrop giver fleksibilitet ved valg af størrelse. Kort model kan kombineres med ekstrabånd 27448 i forhold til ekstra stabilitet. Den lange model har et monteret elastisk bånd omkring håndleddet.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Basic håndledsortose kort - Ortosens længde på volarsiden er 18 cm. Basic håndledsortose lang - Ortosens længde på volarsiden er 21 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27441	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27445	Lang	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

Basic håndledsortose

Håndledsortose med integreret bånd, der giver ekstra god støtte til håndledet. Det brede proximale bånd med bred lukning giver fleksibilitet ved valg af størrelse og letter på- og aftagning. Åben model der er let at tage på og af. Udtagelig formbar aluminiumsskive volart. Højt skåret ved lillefingersiden i forhold til ulnar støtte.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27446	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27446	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27446	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Basic håndledsortose med tommel

Unik designet håndledsbandage, der støtter tommelfingeren. Tommelfingerdelen er delvis fritstående for at følge thenarmuskulaturen og sikre en god pasform. Tommelfingeren holdes i neutralleje ved hvile. Udtagelig og formbar aluminiumsskinne volart. Tommelfingerskinnen i fleksibel plast følger hele bandagens længde for at give ekstra stabilitet. Standardmodel med velcro påsyet og astrakan som lukkestrømpe giver fleksibilitet ved valg af størrelse.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, reumatologiske sygdomme, instabilitet og aflastning.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
27442	Blå	X-Small	< 12 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
27442	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
27442	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø





Mål: Omkreds håndled

Airtex Wrist Support

Airtex håndledsortose giver støtte og kompression under genoptræning efter akutte skader. Ortosen er også velegnet til aktive personer, der har brug for ekstra støtte omkring håndleddet under fysisk aktivitet. Ortosen giver dynamisk støtte til sener og muskler omkring håndleddet uden at immobilisere eller reducere håndleddets funktionalitet. Ortosen har dobbelt justering ved hjælp af to rigide bånd, der giver øget stabilitet og fæste og som kan justeres individuelt for at regulere kompressionen.

Ortosen er en del af den nye AIRTEX-serie fra PRIM, som er designet med en ny hudvenlig limteknologi, der gør det muligt at sætte de forskellige tekstildele sammen uden søm. Fraværet af tråd og søm reducerer gnidning på huden og øger komforten for brugeren. Airtex-produkter er lette med 100% aktiv åndbarhed.

Anvendelsesområde: Artrose, gigt, seneskedehindebetændelse, bursitis, forstuvninger og mindre skader. Støtte og beskyttelse til sports- og arbejdsaktiviteter.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål
28553	Sort	One Size	13-26 cm

Wrist Lacer™ II håndledsortose, kort

Meget stabil håndledsortose med formbare aluminiumskinner dorsalt og volart som er udtagelige. En pude på indersiden af ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøre. Fremstillet i slidstærkt mockaimitation med foer som er åndbart. Lukkesystem med et unik design som giver en jævn kompression ved alle fire bånd. Kompressionen kan enkelt justeres af patienter med udsædvanlig form på underarm og håndled. Snøren er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbart tommelgreb.

Anvendelsesområde: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatisk og postoperativt.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 21 cm i størrelse M.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Pediatric	<12 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28578	Wrist Lacer II	Sort	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Wrist Lacer™ II håndledsortose, lang

Meget stabil håndledsortose i lang model med formbare aluminiumsskinner dorsalt og volart. Skinnerne kan tages ud og formes. En pude på indersiden af ortosens strømpe beskytter tommelbasens sener ved den distale snøre. Fremstillet i slidstærkt mockaimitation med åndbart foer. Lukkesystem med et unik design som giver en jævn kompression ved alle fire bånd. Kompressionen kan enkelt justeres af patienter med atypisk form på underarm og håndled. Snøren er let at åbne og lukke med en hånd. Justerbart tommelstrop.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 26 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28579	Wrist Lacer™II Lang	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

V-Strap™ håndledsortose kort

V-Strap har samme egenskaber som WristLacer. Ortosen adskiller sig ved lukkesystemet og pasform. Ortosen følger håndens konturer og passer også en bred hånd. Det patenterede V-formede lukkesystem holder båndene på plads i D-ringene ved på- og aftagning.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	XX-Small	< 12 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø
28574	Kort	Sort	XX-Large	22-25 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

V-Strap™ håndledsortose lang

V-Strap har samme egenskaber som WristLacer. Ortosen adskiller sig ved lukkesystemet og pasform. Ortosen følger håndens konturer og passer også en bred hånd. Det patenterede V-formede lukkesystem holder båndene på plads i D-ringene ved på- og aftagning.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 26 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28575	Lang	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø

Ryno Lacer® II håndledsortose

Meget stabil håndleds- og tommelortose med formbare aluminiumsskinner dorsalt, volart og radiale. Den radiale tommelskinne følger hele ortosens længde og immobiliserer tommelen effektivt. Fremstillet i slidstærk ruskindsimulation med åndbart foer. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med én hånd. Ryno Lacer II er en opdateret og forbedret Ryno Lacer med bedre polstring i håndfladen, mere polstring over tommelen og opdatering af velcro på ortosens underside.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiske sygdomme og spasticitet.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 22 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28576	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28576	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28576	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28576	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Tripod™ Wrist Lacer håndledsortose, kort

En meget stabil håndledsortose med samme gode komfort og funktionelle egenskaber som Wrist Lacer. Tripod har tre formbare aluminiumsskinner, som er placeret ulnart, palmart og dorsalt. Disse skinner virker sammen for at hindre radial-ulnar deviation og minimere fleksion-ekstension af håndleddet. Den ulnare skinne sammen med det dobbelte snøresystem modvirker radial-ulnar deviation. Præcis som Wrist Lacer tillader Tripod en fuld bevægelighed af tommelen. Lukkesystemet med snører er let at åbne og lukke med én hånd.

Anvendelsesområde: Posttraumatisk, postoperativt, radial-ulnar deviation, carpaltunnelsyndrom, reumatologiske sygdomme og spasticitet..

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 20 cm.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	X-Small	12-14 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	Small	14-16 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	Medium	16-18 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	Large	18-20 cm	Ve/Hø
28577	Kort	Sort	X-Large	20-22 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål: Omkreds håndled

Lacer Wrist kort

Lacer Wrist er en meget stabil håndledsortose med formbare skinner dorsalt og volart samt et stabiliserende håndledsbånd. Snørelukningen gør det nemt at justere med en hånd og puden på den palmare side giver yderligere støtte og komfort. Lacer Wrist anvendes ved forskellige skader og tilstande samt før og efter operationer. Produktet findes også i lang version (art.nr 51427) samt i mange forskellige størrelser, der passer til forskellige behov.

Anvendelsesområde: Artrose, forstuvninger, forstrækninger og instabilitet. Skader og tilstande i blødt væv. Behandling efter frakturer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Længde	Omkreds	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Sort	XX-Small	18 cm	10,5-12,5 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Sort	X-Small	20 cm	12,5-14 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Sort	Small	21 cm	14-16 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Sort	Medium	21 cm	16-18 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Sort	Large	21 cm	18-19,5 cm	Ve/Hø
51426	Lacer Wrist Kort	Sort	X-Large	21 cm	19,5-21,5 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Lacer Wrist lang

Lacer Wrist er en meget stabil håndledsortose med formbare skinner dorsalt og volart samt et stabiliserende håndledsbånd. Snørelukningen gør det nemt at justere med en hånd og puden på den palmare side giver yderligere støtte og komfort. Lacer Wrist anvendes ved forskellige skader og tilstande samt før og efter operationer. Produktet findes også i kort version (art.nr 51426) samt i mange forskellige størrelser, der passer til forskellige behov.

Anvendelsesområde: Artrose, forstuvninger, forstrækninger og instabilitet. Skader og tilstande i blødt væv. Behandling efter frakturer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Længde	Omkreds	Ve/Hø
51427	Lacer Wrist Lang	Sort	Small	24 cm	14-16 cm	Ve/Hø
51427	Lacer Wrist Lang	Sort	Medium	24,5 cm	16-18 cm	Ve/Hø
51427	Lacer Wrist Lang	Sort	Large	25 cm	18-19,5 cm	Ve/Hø
51427	Lacer Wrist Lang	Sort	X-Large	25,5 cm	19,5-21,5 cm	Ve/Hø

Gripa håndledsortose

Ortosen giver effektiv støtte til håndledet ved tunge eller monotome arbejdsopgaver. Et kraftigt elastisk bånd støtter håndledet. "Tuff Grip" i håndfladen sikrer et godt greb om værktøj. Udviklet i samarbejde med montører indenfor værkstedsindustrien.

Anvendelsesområde: Aflastning af håndfladen og håndledet og præventivt ved f.eks. monteringsarbejde.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 18 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28210	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28210	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28210	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled

Bromsa håndledsortose

Håndledsortose med to fleksible plasticskiner dorsalt, der sammen med det kraftige elastiske bånd begrænser dorsalfleksion af håndledet. Modstanden justeres let ved at anvende en eller to plasticskiner, og ved at placere båndet mere proximalt eller distalt. Ingen skinner volart der påvirker hånden's øvrige funktioner.

Anvendelsesområde: Aflastning af ekstensorsenerne i forbindelse med lateral epicondylit.

Øvrigt: Ortosens længde på volarsiden er 15 cm.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
28240	Blå	Small	11-14 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Ve/Hø
28240	Blå	Large	17-20 cm	Ve/Hø
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Mål 1: Omkreds håndflade

Mål 2: Omkreds underarm

CTS håndledsortose

Natortose af tynd, perforeret Krydexplast, der immobiliserer håndleddet. Beregnet til patienter med Karpaltunnelsyndrom med natlige problemer i form af hævelse, følelsesløshed og smerter.

Anvendelsesområde: Karpaltunnelsyndrom.

Øvrigt: Ekstra bånd kan købes separat. Båndet findes i kapitel Plast og Materiale, art. nr. 25030.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
28542	Lyseblå	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø



Mål 1: Omkreds håndflade

Mål 2: Omkreds underarm

CTS Vission

Vission CTS er en natskinne designet til at lindre og/eller forhindre natlig følelsesløshed i hænderne, som opstår som følge af karpaltunnelsyndrom.

Anvendelsesområde: Karpaltunnelsyndrom

Øvrigt: Ekstra bånd kan bestilles separat

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Ve/Hø
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Ve/Hø
46051	Ekstra bånd sæt				

Egne notater



Mål: Omkreds omkring MCP-leddene

Thermoskin® termiske handsker

Kompressionshandske som er formet til komfort. Giver varme og jævn kompression for midlertidigt at lindre gigtsmerter. Handskerne er fremstillet til daglig brug, og teksturen i håndfladerne og udkæringerne i fingerspidserne giver ekstra greb og en bedre fornemmelse for patienten. Det patenterede Trioxon®-materiale stimulerer huden, som derefter producerer varme. Materialet transporterer al fugt væk fra huden og lader den ånde. Det er klinisk bevist, at handsken øger temperaturen på hudoverfladen og subkutant med ca. 2 °C, hvilket forbedrer elasticiteten i muskler, sener og ligamenter.

Anvendelsesområde: Smerter, stivhed eller betændelse i fingerleddene, svaghed i leddene, synlige deformiteter i fingrene.

Kontraindikationer: Anvendes ikke inden de først 72 timer efter en akut skade.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pakke
53242	Sort	X-Small	15-17 cm	1 par
53242	Sort	Small	18-20 cm	1 par
53242	Sort	Medium	21-23 cm	1 par
53242	Sort	Large	24-26 cm	1 par
53242	Sort	X-Large	27-29 cm	1 par
53242	Sort	XX-Large	30 cm >	1 par



Mål: Omkreds omkring MCP-leddene

OrthoThermic™ handsker

OrthoThermic™ ortopædiske handsker giver varme og kompression for midlertidigt at reducere eller lindre smerter, stivhed og inflammation. Handskerne har en lav og blød profil, der bidrager til en behagelig fornemmelse for brugeren. Handskerne har et antimikrobielt foer, der bruger infrarøde fibre til at skabe en termisk effekt, som genererer varme og transporterer fugt væk. Det åbne fingerdesign gør, at fingrene kan udnyttes fuldt ud i de daglige aktiviteter.

Anvendelsesområde: Sportsskader, skader efter ensidigt gentaget arbejde, artrose, tendinitis, neuropati, dårlig cirkulation og andre mindre hånd/led-tilstande.

Kontraindikationer: Hudirritation, allergi over for nylon eller neopren, nedsat blodcirkulation.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Pakke
53243	Sort	X-Small	15-17 cm	1 par
53243	Sort	Small	18-20 cm	1 par
53243	Sort	Medium	21-23 cm	1 par
53243	Sort	Large	24-26 cm	1 par
53243	Sort	X-Large	27-29 cm	1 par
53243	Sort	XX-Large	30 cm >	1 par

Ødemhandske

Handsken er fremstillet af blødt, silkeagtigt nylonlycra med alle syninger på ydersiden. Handsken kommer med lukkede fingre eller i $\frac{3}{4}$ længde. Giver kompression til lindring af blødt vævsødem og leddegigtssmerter. Har en åben slids i manchetten for nem påsætning og ikke-tilsluttende pasform. Giver 15-25 mmHg blid og jævn kompression til ødematøst væv. Længden proksimalt for håndleddet er 76 mm.

Øvrigt: Kompressionsklasse 1.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Pakke	Ve/Hø
53535	Hele fingre	XX-Small	10-11 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	X-Small	11-14 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Small	14-17 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Medium	17-19 cm	1 stk.	Ve/Hø
53535	Hele fingre	Large	19-22 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	XXS	10-11 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	X-Small	11-14 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	Small	14-17 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	Medium	17-19 cm	1 stk.	Ve/Hø
53536	Åbne fingre	Large	19-22 cm	1 stk.	Ve/Hø



Mål: Omkreds MCP-Led.

Isotoner® handsker

Isotoner® terapeutiske handsker giver lindring af smerter og hævelse i forbindelse med gigt eller smerter og hævelse efter håndskader.

Fås med åben finger 3/4 eller fuldfinger. Det glatte strækstof af nylon og spandex giver en blid, jævn kompression, der hjælper med at lindre smerter og forebygge ødemer. Alle sømme er på ydersiden af handsken og området omkring tommelfingeren er helt fri for sømme. Giver moderat kompression på ca. 23 til 32 mm Hg tryk. Handskerne er i unisex-størrelse til både mænd og kvinder.

Øvrigt: Kompressionsklasse 2.

Art. nr.	Model	Størrelse	Mål	Pakke
53538	Åben finger	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53538	Åben finger	Small	14 cm - 17 cm	Par
53538	Åben finger	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53538	Åben finger	Large	19 cm - 22 cm	Par
53539	Fuldfinger	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53539	Fuldfinger	Small	14 cm - 17 cm	Par
53539	Fuldfinger	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53539	Fuldfinger	Large	19 cm - 22 cm	Par



Mål: Omkreds MCP-Led.



CS-skinne

CS-skinne er en blå volar skinne, fremstillet i Polypropylen. Skinnen er anatomisk præformet i hånden hvilestilling, ud fra antropometrisk data, så den passer majoriteten af voksne. Kan omformes ved opvarming med en varmpistol. Skinnen er opbygget af et tyndere, kraftigt parti. Den kraftigste støtte ligger i hånddelen, for siden hen at tyndes ud og afsluttes i skinnens lettere afbøjede ender for ikke at give tryk. Dette giver en dynamisk støtte med en god stabilisering, hvis det ønskes.

En blød, hvid dorsal plastskinne, som er lige i formen. Skinnen har en let støttende funktion.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål	Pakke	Ve/Hø
35210	Volar skinne	Blå	One size	22x168 mm	10	Bilat.
35211	Dorsal skinne	Hvid	One size	11x148 mm	10	Bilat.



Ekstra håndledsbånd

Ekstra stabiliserende bånd til vores forskellige håndledsortoser. Passer til forskellige versioner af håndledsortoser.

Art. nr.	Model	Farve
46032	Vision & Selection ekstra håndledsbånd	Sort
27448	Basic ekstra håndledsbånd	Blå



SOT hvileortose

SOT hvileortose er lavet til hænder, som behøver støtte af en ortose ved hvile eller til udspænding, for at bibeholde eller øge håndens bevægelighed. Den meget gennemtænkte biomekaniske positionering af leddene stimulerer den spatisk hånd til afslapning og kan også bidrage til mindre smerte. Ortosen kan også anvendes til at positionere håndleddet i neutral stilling. Betrækket fordeler trykket på volar- og dorsalsiden af hånden samt armen og kan derved forhindre eller eliminere hævelse. Ortosen leveres i en grundposition i hvilestilling. Den kan enkelt omformes til POSI (Position of Safe Immobilization) ved anvendelse efter trauma og håndkirurgi. SOT er en smidig og let ortose med et moderne design. Kernen er aluminium, hvilket gør, at ortosen enkelt kan finjusteres til ønsket position. Aluminiumkernen er dækket af polyetenskum som er et behageligt materiale. Betrækkets glatte yderside og ortosens lave profil gør at den har plads under tøj. Til ortosen findes en del ekstra tilbehør. Det ikke elastiske håndledsbånd kan anvendes til at give et mere fast tryk over håndleddet, f.eks. ved spasticitet og der forefindes fingerdeler og kiler i flere forskellige størrelser.

Anvendelsesområde: Stroke, cerebral parese, reumatoid artrit, plexus- og muskelsvind, radialis-parese. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) ved trauma, frakturer, brandskader, ligamentskader og efter kirurgi.

Øvrigt: Udover det ekstra håndledsbånd, findes der to andre tilbehør: en fingerdeler og en kile i tre forskellige størrelser



Mål: Mål 1: 2-5 MCP
Mål 2: Håndens længde fra håndled til fingerspids

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Ve/Hø
28710	SOT hvileortose	Sort	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Ve/Hø
28711	MCP KIL	Sort	XX-Small	Bredde 65 mm	Højde 10 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Sort	Small	Bredde 75 mm	Højde 15 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Sort	Large	Bredde 90 mm	Højde 20 mm	Bilat.
28712	Fingerdeler	Sort	Børn			Bilat.
28712	Fingerdeler	Sort	Medium			Bilat.
28712	Fingerdeler	Sort	Large			Bilat.
28713	Ekstra bånd	Sort	XXX-Small-X-Small			Bilat.
28713	Ekstra bånd	Sort	Small-Large			Bilat.
28714	Ekstra betræk	Sort	XXX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	XX-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	X-Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	Small			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	Medium			Ve/Hø
28714	Ekstra betræk	Sort	Large			Ve/Hø
28726	SOT ekstra tekstil/stof	Sort	35 x 35 cm			



Jura håndfladebeskytter

Blød ortose der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Ønskes yderligere ekstension, kan en rulle let sættes ind mellem håndfladen og fingrene.

Anvendelsesområde: Fremskredne kontrakturer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø	Antal/pakke
51602	Håndfladebeskytter	Hvid/Beige	Onesize	Ve/Hø	3



Håndfladebeskytter

Blød ortose der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Ønskes yderligere ekstension, kan en rulle let sættes ind mellem håndfladen og fingrene.

Anvendelsesområde: Fremskredne kontrakturer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Ve/Hø
51600	Håndfladebeskytter 1 stk.	Hvid/Beige	One size	Ve/Hø
51601	Håndfladebeskytter 3 stk.	Hvid/Beige	One size	Ve/Hø



Håndfladebeskytter med fingerdeler

Blød bandage der beskytter håndfladen ved fingerkontrakturer. Materialet mellem fingrene giver en let abduktion. Kan åbnes helt for let påtagning.

Anvendelsesområde: Fremskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
51605	Hvid/Beige	One Size	Ve/Hø



Carve-It™ håndpositioneringsortose

Ortose der hjælper med til at holde hånden, ved mild til moderat fingerspasticitet, i en funktionel position. Ortosen har udtagelig polstring. Inde i hånden findes en anatomisk formet skumdel, der bevarer håndfladens runding. En flad underside gør den let at positionere mod underlaget eks. i sengen. Kan klippes til ønsket form. Universal anvendelse til både venstre og højre hånd.

Anvendelsesområde: Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus.

Øvrigt: Aftageligt betræk der kan håndvaskes og lufttørres.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51650	Hvid	Small/Medium	<7,6 cm	Bilat.
51650	Hvid	Large/X-Large	>7,6 cm	Bilat.



Mål: 2-5 MCP-led



Sof-Gel™ håndfladebeskytter med fingerdeler

Blød håndfladebeskytter med trykafastende foam, der beskytter håndfladen og huden mellem fingrene. Den brede volare del beskytter tommelfingeren.

Anvendelsesområde: Fremskredne kontrakturer.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Ve/Hø
51615	Beige	One Size	Ve/Hø



Kwik-Form™ hvileortose

Ortose der kan justeres til ønsket position uden værktøj. Velcrobåndene hæfter direkte mod ortosens bløde betræk. Støtter tommelfinger, hånd og håndled.

Anvendelsesområde: Behandling og korrektion af kontrakturer og ændret tonus.

Art. nr.	Farve	Størrelse	Mål	Ve/Hø
51638	Sort	Small/Medium	<18 cm	Ve/Hø
51638	Sort	Medium/Large	>18 cm	Ve/Hø



Mål: Omkreds håndled



Comfy håndledsortose

En hvileortose som hjælper med at bibeholde/forbedre ekstension i håndled, MP-, PIP og DIP leddet. Den forebygger også yderligere deformiteter, forbedre ROM og understøtter en god hygiejne af involveret extremitet. Ortosen kan justeres til ønsket ekstension/fleksion af håndled og finger. Betrækket er en polyester/bomuldsblanding, som tillader cirkulation af luft og mindsker risikoen for skader på huden.

Anvendelsesområde: Positionere og støtter hånden ved håndleds- MP-PIP eller DIP bøjningsmønster, ulnar deviation, drophånd, deformiteter relateret til neuromuskulær svækkelse

Kontraindikationer: Cirkulationsproblem, trykpunkter eller hudirritationer.

Art. nr.	Model	Farve	Størrelse	Mål 1	Mål 2	Ve/Hø
51645	Comfy håndledsortose	Blå	Small	15-18 cm	28 cm	Bilat.
51645	Comfy håndledsortose	Blå	Medium	18-20 cm	32 cm	Bilat.

Mål 1: Fra håndled til midten af langfinger.

Mål 2: Total længde. (fra midten på underarmen til toppen af langfinger)